

Aquatec **Orca**, **Orca F**, **Orca XL**

Fare il bagno con il sollevatore da vasca Aquatec **Orca** è molto semplice e confortevole. Dotato di una stabile e robusta crociera e di una base saldamente ancorata alla superficie della vasca con 4 ventose, può essere facilmente richiuso e stivato. Di serie il sollevatore è dotato di una batteria agli ioni di litio integrata alla pulsantiera materiale che garantisce una maggiore autonomia di carica.



AQUATEC®

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Aquatec Orca

- motore a manutenzione zero, potente e silenzioso
- schienale alto con poggiatesta avvolgente, posizionabile e ripiegabile solo con una mano
- schienale reclinabile fino a 40°
- le batterie sono contenute nella pulsantiera e i movimenti di salita/discesa e reclinazione sono estremamente fluidi
- la pulsantiera ha una forma ergonomica per una presa sicura
- fodere rimovibili e lavabili in lavatrice
- piatto base migliorato con una pratica maniglia di presa per garantire un facile riposizionamento del sollevatore nella vasca
- ampia gamma di accessori
- porta telecomando sullo schienale
- fori drenanti nel piatto base per una migliore pulizia
- la versione base prevede la discesa della seduta con successiva reclinazione dello schienale per una migliore immersione
- la versione Orca F ha la sola seduta regolabile, perchè lo schienale rimane fisso in posizione alta

Aquatec Orca

AFFIDABILITA' E SICUREZZA SEMPRE AL PRIMO POSTO!



Aquatec Orca
con schienale reclinabile.




Aquatec Orca F
con schienale fisso.



Aquatec Orca XL
con schienale reclinabile,
portata 170 Kg.

Dati tecnici

Codici prodotto	Aquatec Orca	Aquatec Orca F	Aquatec Orca XL
Sollevatore per vasca con fodera	1573864	1573476	1573685
Sollevatore per vasca Orca con alette laterali	1573970		
Dimensioni			
Larghezza seduta senza alette	375 mm	375 mm	375 mm
Larghezza seduta con alette	715 mm (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Profondità seduta	490 mm (B)	490 mm (B)	490 mm (B)
Altezza max. seduta	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Profondità seduta minima	60 mm	60 mm	60 mm
Larghezza dello schienale	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Altezza dello schienale	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Profondità totale (schienale dritto)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Profondità totale (schienale reclinato)	920 mm	-	920 mm
Altezza totale con lo schienale	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Larghezza della base	580 x 285 mm	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Spessore fodera	3 mm	3 mm	3 mm
Maggiori informazioni			
Peso totale senza pulsantiera	10.8 Kg	11.4 Kg	11.6 Kg
Peso totale senza pacco batterie	-	-	-
Peso della seduta	6.6 Kg	7.2 Kg	7.4 Kg
Peso dello schienale	4.2 Kg	4.2 Kg	4.2 Kg
Peso della pulsantiera	0.4 Kg	0.4 Kg	0.4 Kg
Peso del pacco batterie	-	-	-
Portata massima	140 Kg	140 Kg	170 Kg
Lo schienale può essere reclinato fino a	40°	-	40°
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Codici NT	12.36.03.006	12.36.03.006	12.36.03.006
Nr. repertorio DM	109570/R	109570/R	109570/R

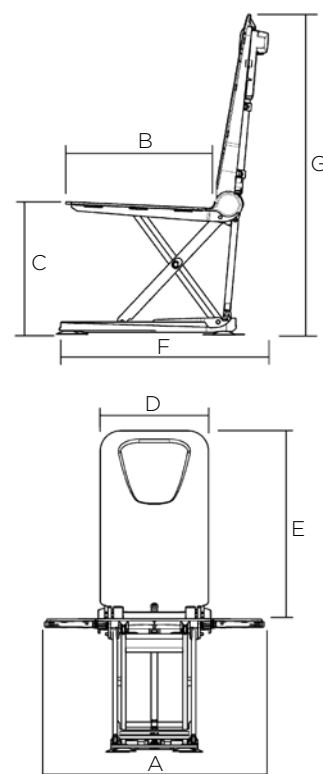

Caratteristiche e optional




Può essere utilizzato anche senza fodera protettiva.



Può essere facilmente richiuso.



Pulsantiera con grande autonomia e dispositivo di controllo della temperatura durante la carica.

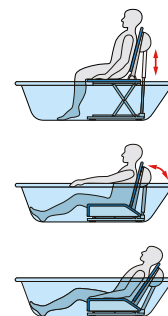

Movimenti del sollevatore.

Accessori Aquatec sollevatori per vasca



Alette laterali

Disponibile anche una versione con alette laterali di contenimento sullo schienale. **1574062 Aquatec Orca** con alette laterali.



Poggiatesta regolabile in altezza

15461 Completo di viti.



Cintura pelvica e pettorale

1528702 In soffice materiale, regolabile in larghezza, per una stabile posizione laterale



Cuneo divaricatore ad estrazione rapida.

1525932 Blu, diametro 70 mm.
1525933 Blu, diametro 120 mm.



Adattatori in altezza

Per incrementare l'altezza di 20 mm, 40 mm e 60 mm.

15170 kit altezza di 20 mm con ventose.

14694 kit altezza di 20 mm senza ventose.



Borsa per il trasporto

Con ruotine per facilitare il trasporto (optional).