

matrx[®] LIBRA



CUSCINO LIBRA

Protezione e posizionamento personalizzati





matrx[®] LIBRA

Progettazione condotta da professionisti clinici

Matrx Libra è un cuscino modulare progettato per offrire il perfetto equilibrio tra immersione, scarico della pressione e avvolgimento. Garantisce un'elevata protezione della cute e un ottimo supporto posturale, rappresentando una delle soluzioni più avanzate all'interno della nostra gamma di cuscini.

DESIGN MODULARE

Un cuscino versatile che si adatta alla maggior parte delle carrozzine manuali ed elettriche. Disponibile con un'ampia gamma di accessori per una protezione della cute e un posizionamento mirati.



PRECISIONE

Tutte le caratteristiche sono frutto del lavoro del nostro team di esperti e sono progettate per offrire alte prestazioni e adattarsi perfettamente alle esigenze dell'utente.



COMFORT


La forma sagomata, in combinazione con il fluido di supporto, assicura un'eccellente protezione e un comfort ottimale, adattandosi alla morfologia naturale del corpo.



SUPPORTO

Sagomato anatomicamente per favorire una buona postura e un allineamento naturale. Disponibile con un'ampia gamma di opzioni.

Prevenzione avanzata

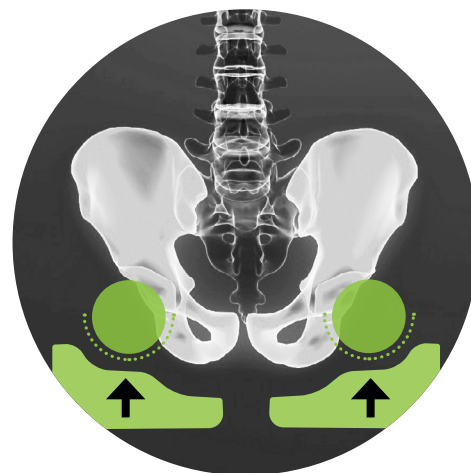

IMMERSIONE

Massimizza l'area di contatto con la superficie per ridurre le pressioni.
Pressione = Forza / Area



SCARICO

Trasferisce le forze lontano dalle tuberosità ischiatiche, distribuendo un maggiore carico sui trocanteri, anche e cosce.



AVVOLGIMENTO

La sacca di fluido avvolge completamente le prominenze ossee, anche durante i cambi di posizione.

Favorisce la stabilità

La stabilità inizia dal bacino. Matrix® Libra è un cuscino sagomato che offre supporto laterale ai trocanteri e stabilità pelvica anteriore/posteriore. Questo favorisce l'estensione della colonna vertebrale per migliorare la funzionalità degli arti superiori, le funzioni fisiologiche e il controllo del capo.



STABILITA'

Favorisce l'estensione della colonna vertebrale per favorire un migliore movimento.



m Sistema modulare per un adattamento posturale personalizzato

Matrx® Libra è completamente configurabile per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di posizionamento.

Le opzioni del cuscino sono progettate per migliorare l'immersione, oltre che correggere o adattarsi al posizionamento pelvico.

FACILMENTE PERSONALIZZABILE



CUNEO ANTERIORE

Aumenta l'inclinazione, previene lo scivolamento e riduce le forze di taglio.



CUNEO ANTERIORE HEMI

Per limitazioni della flessione dell'anca e/o per un'altezza della seduta inferiore utile alla spinta con i piedi.



CUNEO ANGOLARE RASTREMATO

Per un migliore supporto degli adduttori.



CUNEO RASTREMATO

Per obliquità e rotazione pelvica quando utilizzato nella parte posteriore.



CUNEO LATERALE

Rinforza la stabilità.



CUNEO ABDUTTORE

Per migliorare il posizionamento degli arti inferiori.



SACCA IN GEL FLUIDO

Può essere utilizzata su un solo lato per compensare l'obliquità pelvica, oppure bilateralmente per aumentare la profondità della cavità pelvica.



Visto da vicino

Matrix® Libra è un cuscino modulare per la protezione della cute e il posizionamento che combina la nostra schiuma sagomata distintiva con il fluido Flo-tech e una gamma di accessori.

COPERTURA PLATILON

Protegge il cuscino dall'ingresso dei fluidi.

PERSONALIZZAZIONE

Scegli tra una gamma di opzioni di posizionamento per migliorare l'immersione, correggere o adattare la postura pelvica.

TAGLIO A CASCATA FRONTALE

Permette un pieno supporto delle cosce, un posizionamento ottimale dei piedi, trasferimenti più facili e una spinta con gli arti inferiori più efficace.



FODERE DISPONIBILI

Disponibile tessuto smooth o traspirante spacer.

TASCA LATERALE

Facile da riporre, grazie al cordino a quattro tiranti integrato.

CURVATURA POSTERIORE

La particolare curvatura posteriore (3,8 cm) stabilizza il fluido in caso di basculamento, garantendo maggior supporto al coccige e al sacro.

TECNOLOGIA FLO-TECH™

Sacchetto fluido a doppio strato e tre camere per una protezione massima intorno alle prominenze ossee. Il fluido non è sensibile alla temperatura e non richiede riposizionamenti manuali.

FORMA SAGOMATA

Schiuma sagomata ad alta resilienza per una maggiore stabilità quando seduti.



Dimensioni Cuscino

	LARGHEZZA								
	35.5cm	38cm	40.5cm	43cm	45.5cm	48cm	50.5cm	53cm	56cm
PROFONDITA'									
30.5cm	●								
35.5cm	●								
40.5cm	●	●	●	●	●	●	●		
43cm				●					
45.5cm		●	●	●	●	●	●	●	●
50.5cm		●	●		●	●	●	●	●
56cm								●	●

Dati Tecnici

- Peso totale prodotto1.6kg
- Peso max utenteStd 136kg / HD 227kg
- Altezza all'adduttore.Std 8.5cm / HD 9.1cm
- Altezza nella parte sagomata per le cosce Std 5.7cm / HD 6.6cm
- Temperatura max di lavaggio (fodera esterna)80°C
- Pulizia superficie (rivestimento interno)Con panno umido

FODERE



Tessuto Smooth

- Impermeabile
- Traspirante



Spacer

- Traspirante al vapore





invacare.eu.com

© 2025 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. IT – 10/25