


Invacare | Materassi

	Materassi antidecubito				Materassi antidecubito con compressore	
	Invacare Materasso Ventilato	Invacare Respos L883	Invacare Basic	Invacare Softform Premier Visco	Invacare Liber L803 & Eskal L839	Invacare Softform Premier Active 2
						
Codice NT:	03.33.06.003	03.33.06.006	03.33.06.003	03.33.06.006	03.33.06.018	03.33.06.006 + 03.33.06.021
Nr. Repertorio DM:	662190/R	108171/R	756848/R	189322/R	109020/R	765399/R
Livello di rischio	medio	medio	medio	alto	medio	alto
Larghezza (mm)	900	850	880	da 800 a 1525	890	880
Lunghezza (mm)	1905	1950	1950	da 1830 a 2080	1980	1950
Altezza (mm)	140	180	140	152 o 140	68	152
Peso (Kg)	6,5	10	13	13 (misura standard)	2,5 / 2	14
Peso massimo utilizzatore (Kg)	100	100	140	245	100	247,6

1/ Consultare scheda d'ordine

Invacare Materasso Ventilato

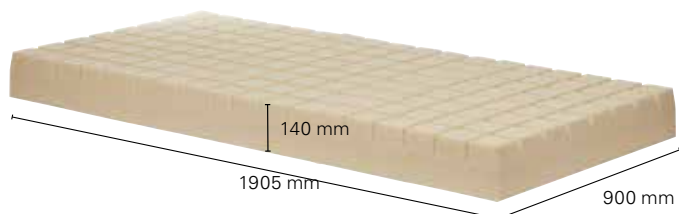


Il materasso ventilato in espanso monodensità riduce il rischio da decubito a quei pazienti che devono stare a letto per un lungo periodo. La particolare forma del materasso con sezioni a "torre" facilita la circolazione dell'aria evitando così la sudorazione del corpo e il conseguente rischio di lesioni durante i movimenti del paziente.

- Autoestingente.
- Sezioni monodensità.
- 3 sezioni identiche e indipendenti.

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare Respos L883

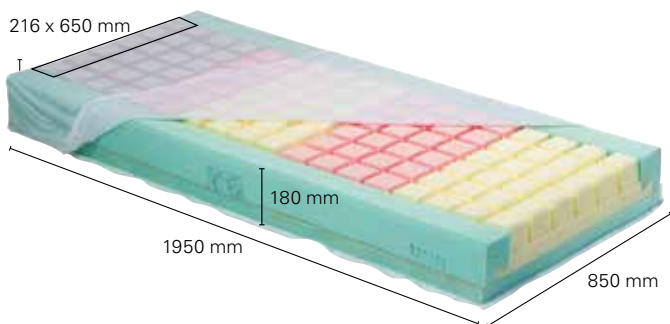


Materasso ventilato in espanso a densità differenziate. La combinazione di 9 zone di diversa densità (mousse più morbida nelle parti a rischio elevato e mousse più densa nelle zone a rischio ridotto), garantisce lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle differenti regioni corporee.

- Zone a densità differenziate:
 - Modulo colore beige = lato testa, tacche morbide e confortevoli.
 - Moduli colore giallo = punti di appoggio del corpo, natiche e talloni, zone di prevenzione, moduli rigidi.
 - Moduli colore rosa = tacche semi rigide, gambe e schiena.
- I moduli sono asportabili e riposizionabili.
- La base a U rende più confortevole il posizionamento e facilita il contenimento del paziente.
- Consegnato con un telo di protezione con cerniera.

Invacare Traversa L881

Traversa estremamente elastica, impermeabile, in Dermalon per proteggere i materassi in espanso.

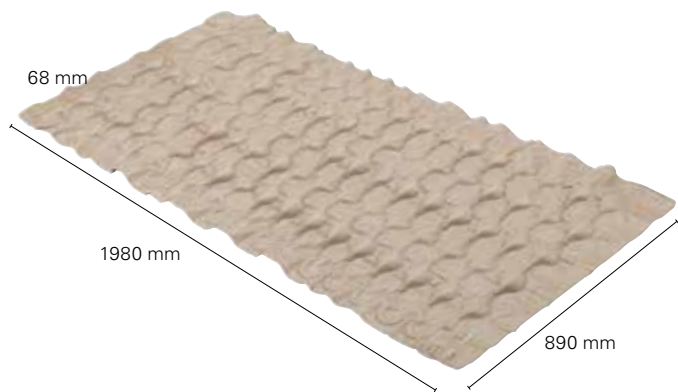

Invacare Liber L803 / Eskal L839

Per impedire che la stessa parte del corpo del paziente sia sottoposta per lungo tempo a delle forti pressioni, è nato il sovrmaterasso **Eskal** costituito da 2 serie di celle d'aria a forma sferica, disposte alternativamente in file parallele e interconnesse che si gonfiano e sgonfiano ciclicamente.

E' dotato di un compressore **Liber**, molto silenzioso, con il regolatore di flusso d'aria.

- I movimenti del materasso favoriscono la circolazione dell'aria.
- Compressore molto silenzioso.
- Pressione dell'aria regolabile.
- Peso paziente : 50 - 100 kg.
- Compressore con 2 ganci di fissaggio al letto.



Caratteristiche tecniche

	Materasso Ventilato	Respos	Traversa	Liber-Eskal
Codice NT	03.33.06.003	03.33.06.006	03.33.06.027	03.33.06.018
Nr. Repertorio DM	662190/R	108171/R		109020/R
Peso	6,5 Kg	10 Kg	0,4 Kg	2,5 / 2 Kg
Peso massimo utilizzatore	100 Kg	100 Kg		100 Kg

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI