


KÜSCHALL CHAMPION

ANCORA PIU' RIGIDA, ANCORA PIU' LEGGERA, ANCORA PIU' COMPATTA!

Küschall presenta in grande stile la nuova versione della carrozzina ibrida per eccellenza, migliorando un prodotto ancora unico sul mercato dopo quasi 30 anni di storia! La nuova küschall Champion conquista livelli di eccellenza mai raggiunti prima. Prestazioni

di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida si accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole: scorrevolezza e rigidità senza paragoni, massima precisione delle regolazioni in continuo, design unico.

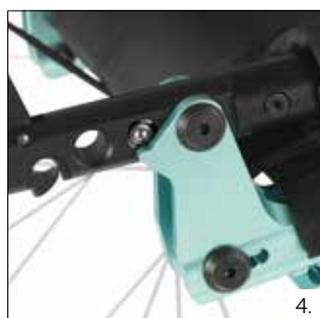

LEGENDA

- 1. CONFIGURAZIONE:** Questa carrozzina ha un telaio standard in alluminio color bianco avorio in combinazione CPS artic blue, parafanghi rimovibili in carbonio, schienale standard con imbottitura leggera, freni performance, 4" ruote anteriori Starec e ruote posteriori ad alte prestazioni con pneumatici Schwalbe Marathon e corrimano Surge.
- 2. COMPATTEZZA:** Dimensioni compatte: chiudi la carrozzina ed il suo schienale, togli le ruote e Champion è pronta per essere riposta anche nelle automobili più piccole.
- 3. REGOLAZIONE CONTINUA:** Puoi scegliere tra 9 differenti posizioni di seduta e 5 angolazioni dello schienale. Piastre di supporto disponibili anche nel colore CPS prescelto.
- 4. SCHIENALE:** Un semplice meccanismo, fornito in configurazione standard, permette allo schienale di rimanere abbattuto mentre la carrozzina viene chiusa.

DATI TECNICI

 **Angolazione telaio**
75°/85°
Dritto e addotto

 **Larghezza seduta**
360 – 480 mm
a passi di 20 mm

 **Profondità seduta**
340 – 480 mm
a passi di 20 mm

 **Altezza seduta**
davanti: 450 – 540 mm
dietro: 390 – 490 mm
regolazione continua

 **Lunghezza gambe**
320 – 500 mm
regolazione continua

 **Altezza schienale**
300 – 465 mm
a passi di 15 mm

 **Angolo schienale**
76°/80.5°/85°/89.5°/94°

 **Pendenza massima**
7°

 **Raggio curvatura**
920 – 1230 mm

 **Larghezza totale**
L + 160 mm

 **Larghezza totale piegata**
circa 285 mm

 **Profondità**
75°: circa 930 mm
85°: circa 850 mm

 **Peso totale senza accessori**
circa 9.2 kg

 **Peso senza ruote posteriori**
circa 6.7 kg

 **Peso max utente**
125 kg