

VERSATILITÀ e MODULARITÀ
rea | *Flex3*





Alle già affermate funzionalità che caratterizzano **Rea Azalea** e **Rea Dahlia**, si aggiunge ora il nuovo schienale Flex3, che rende queste carrozzine posturali ancora più adattabili alla fisicità dell'utente. Lo schienale Flex3 sia nella versione con scocca rigida che tensionabile è regolabile in larghezza (in maniera indipendente rispetto alla seduta), in altezza, allargato in maniera asimmetrica o ruotato (solo tensionabile) per creare maggior spazio a livello sacrale o scapolare. Flex3 permette di applicare sistemi di postura per il tronco anche complessi grazie ai tubi tondi dello schienale.


Rea Azalea e **Rea Dahlia** sono particolarmente indicate per gestire pazienti geriatrici o affetti da disturbi reumatologici o neurologici grazie alle regolazioni del telaio (larghezza, profondità), dei portapedane, dei poggiatesta e possibilità di scelta tra diversi cuscini, pelotte toracali, poggianuca/poggiatesta e svariati accessori/optional posturali.

Rea Azalea family: una risposta a tante esigenze posturali.

Indicazione sul tipo di schienale e su come deve essere regolata la seduta in base alla fisicità del paziente.

Scocca (Tensionabile)	Scocca (Tensionabile)	Scocca Tensionabile	Scocca (Tensionabile)	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	Tensionabile	Tensionabile	(Scocca) Tensionabile
Statura bassa Seduta più chiusa possibile	Statura alta Schienale alzato, seduta allungata	Corporatura normale Schienale e sedile in posizione normale	Fianchi larghi Schienale e seduta allargati	Torace largo Parte superiore dello schienale allargata, seduta ristretta	Bacino largo Parte inferiore dello schienale e della seduta allargati	Addome ipertrofico Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio scapolare	Glutei ipertrofici Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio a livello sacrale	Cifotico Zona dorsale allargata, maggiore avvolgenza sulla zona pelvica	Schiena ad S Zona pelvica più contenuta, altre zone adattate alla forma ad S

Tipo di schienale

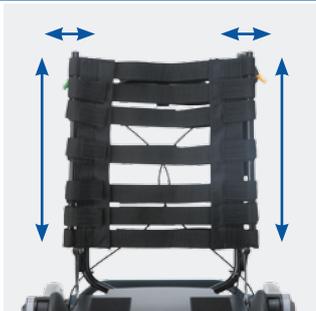

Flex3: schienale tensionabile
Regolabile in altezza, larghezza in maniera simmetrica e non. Possibilità di ruotarlo di 180° e di angolare singolarmente i tubi.



Schienale tensionabile, regolazioni
Massima libertà di orientare in maniera indipendente i tubi dello schienale per seguire la forma del tronco.



Flex3: schienale con scocca rigida
Regolazione in continuo dell'altezza. Regolabile in larghezza in maniera simmetrica e non.



Flex3 al completo
Ampia scelta di soluzioni posturali per lo schienale tra cuscini e poggianuca/poggiatesta e pelotte toracali.