



Invacare® Cuscino Flo-Shape



Invacare **Flo-Shape** è un cuscino seduta alto 103mm indicato per pazienti 'A rischio' di piaghe da decubito.

Offerto in combinazione con le carrozzine della famiglia Rea, questo modello garantisce una redistribuzione della pressione e riduce i picchi di pressione nelle aree più a rischio.

La parte superiore del cuscino **Flo-Shape** è sagomata in più sezioni, questo grazie alla particolare produzione a stampo, che consente la produzione di manufatti tridimensionali che non possono essere ottenuti con la classica lavorazione a taglio. Questa particolare forma consente di allontanare il peso dai punti di pressione più critici.

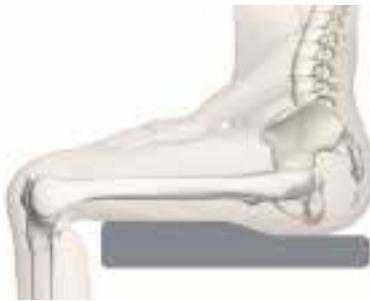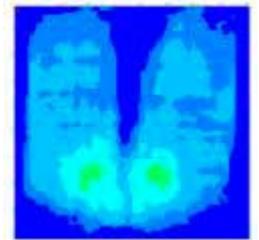


La forma anatomica del cuscino:

- sostiene in modo naturale le tuberosità ischiatiche, riducendo la retrovesione del bacino e le conseguenti forze di taglio e frizione.
- garantisce un buon posizionamento del bacino e un corretto allineamento degli arti inferiori, in particolare per quei pazienti che hanno uno scarso bilanciamento posturale causato da deficit neurologici.

Elementi chiave del cuscino

- Schiuma lavorata a stampo e non a taglio
- Superficie superiore sagomata
- Confortevole, stabile, favorisce la distribuzione della pressione
- Fodera Dartex bielastica, impermeabile e idrorepellente (di serie)
- Con fodera impermeabile nera (Black smooth) o traforata traspirante (black spacer)
- Disponibile in diverse misure
- Peso massimo del paziente 190,5 kg

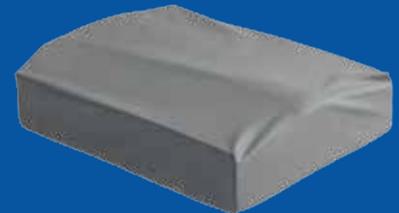

Dati tecnici

Schiuma	Grado ref e colore: FG 70/150 grigio Densità nominale (kg/m): 65-75 Durezza nominale (N): 150 Classe di fatica: Molto alta
---------	---

Testi del fuoco	EN 597 - 1 & 2 BS 7176: 1995 crib 5
-----------------	--

* La portata massima varia a seconda delle dimensioni del cuscino.

Knowledge bank

INVACARE MECC SAN s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI)
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

rea
Confidence in posture solutions

INVACARE
Yes, you can.®