



Invacare® | **Kite**®

Una carrozzina elettronica
versatile, unica nel suo genere

LINX®



Invacare **Kite** è una carrozzina elettronica in grado di combinare prestazioni eccellenti, comfort di guida, compattezza e possibilità di personalizzazione. Progettata per utilizzatori attivi, Invacare Kite si caratterizza per il design compatto che la rende perfetta per le attività all'aria aperta. E' disponibile in una vasta gamma di colori. La tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)[®], un sistema di sospensioni unico nel suo genere, assicura un'esperienza di guida straordinaria, ottimizzando il comfort e l'aderenza al terreno. Soprattutto all'aperto, in presenza di superfici accidentate.

- Tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)[®]
- Prestazioni di guida eccellenti
- Massima personalizzazione
- LiNX Smart Technology

Tecnologia brevettata Dual Swing Technology (D.S.T.)[®]

La carrozzina **Kite** è assolutamente versatile quanto a prestazioni, comfort di guida e compattezza. La tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)[®], le ruote anteriori e posteriori grandi e la base eccezionalmente compatta danno il meglio di sé nelle attività quotidiane all'aria aperta.

Prestazioni di guida eccellenti

Kite monta le ultimissime soluzioni tecnologiche di Invacare, tra cui i motori SSD e le sospensioni Dual Swing Technology (D.S.T.)[®]; offre inoltre, su richiesta il sistema G-TRac che garantisce sempre la corretta direzione della carrozzina senza dover correggere la guida.

Massima personalizzazione

Kite è assolutamente modulare e si presta ad essere personalizzata in base alle necessità degli utilizzatori. Sono disponibili 7 colori di tendenza per la carenatura, da abbinare a due diverse opzioni colore per il telaio e a 3 alternative per i cerchi. Modulabile anche nelle prestazioni, grazie alla possibilità di montare batterie più grandi per aumentare la distanza percorribile, o in versione HD con motori potenziati a 4 poli e centralina elettronica da 120A.



LiNX Smart Technology: un nuovo concetto di mobilità

Invacare **LiNX** è il nostro sistema di controllo ispirato alla tecnologia di nuova generazione. E' un sistema che offre agli utilizzatori un'incredibile esperienza di guida e ai tecnici la possibilità di programmare e personalizzare la carrozzina elettronica velocemente e in modo intuitivo. Grazie alla tecnologia smart control gli specialisti gestiscono programmazione e manutenzione in wireless e in tempo reale, con accesso diretto alle statistiche e alla diagnostica.



Display Touch

Il comando REM400 è dotato di un sorprendente display touch da 3,5" a colori che richiede una forza minima per essere utilizzato. Con REM 400 la tecnologia di nuova generazione incontra il settore delle carrozzine elettroniche: finalmente un comando fortemente interattivo, configurabile in base alle capacità fisiche e cognitive dell'utilizzatore



Comandi alternativi

Per migliorare il controllo e l'indipendenza di quanti non riescono ad utilizzare un joystick tradizionale, **LiNX** propone una vasta gamma di comandi alternativi. Tra questi: joystick compatti, comandi compatti in versione "Low Force", joystick controllati con il mento o in versione doppio comando.

Caratteristiche e opzioni

Caricatore USB

2 porte USB 2.0 fino a 1A ciascuna, per mantenere in carica il dispositivo. Il sistema di installazione su binario consente un facile accesso



Tecnologia LiNX G-Trac®

La tecnologia Linx migliora la funzionalità, il controllo della traiettoria e le prestazioni dell'ausilio, mentre il sistema giroscopico brevettato **G-Trac** (disponibile su richiesta) garantisce la corretta direzione di avanzamento della carrozzina, senza necessità di correggere la guida



Elevazione e basculamento seduta

L'elevazione della seduta fino a 300 mm consente di raggiungere agevolmente gli oggetti posti ad una determinata altezza. Il basculamento consente di assumere una posizione di relax e favorisce una miglior distribuzione della pressione corporea.



Sistema seduta Modulite

La struttura consiste in un telaio telescopico con profilo laterale che consente l'inserimento di braccioli e accessori.



Schienali Matrix® di Invacare

Al sistema di seduta Modulite è possibile abbinare vari tipi di schienale **Matrix**® per assicurare un supporto posturale e un posizionamento ottimali.




Seduta Max

Per utenza bariatrica. Ampiezza seduta 550 mm.




Tecnologia Dual Swing (D.S.T.)®

La tecnologia D.S.T. opera sui due assi, sia orizzontalmente che verticalmente, combinando o mantenendo indipendenti i due movimenti. In questo modo potenzia la trazione della carrozzina assicurando aderenza al terreno e un'esperienza di guida confortevole.

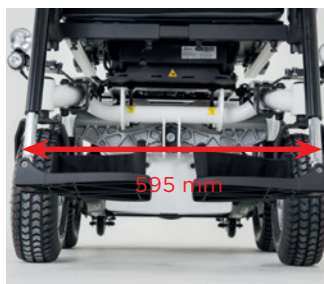


Compattezza

Anche se dotata di un passo estremamente ridotto di soli 595 mm*, Kite può montare batterie potenti, fino a 73 Ah - una caratteristica unica per carrozzine di questo segmento.

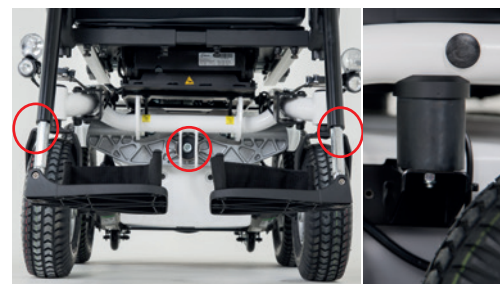

Asse oscillante

Il cuore del sistema D.S.T. è l'asse oscillante che, lavorando in tandem con gli ammortizzatori laterali, riduce le vibrazioni e aumenta l'affidabilità di guida.

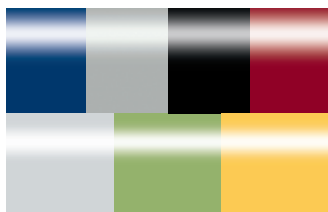

Ampia gamma di colori disponibili

Personalizzabile in 7 diversi colori per la carenatura, 2 per il telaio e 3 per i cerchi.



Manutenzione

L'accesso all'elettronica e alle batterie non richiede utensili particolari e consente una manutenzione veloce e agevole.



Luci a LED

Luci dal design accattivante, collocate in posizione protetta e integrate nella carenatura posteriore.



Ruote anteriori da 10"

Le ruote anteriori, grandi e robuste, consentono di superare agevolmente gli ostacoli e assicurano un'esperienza di guida assolutamente piacevole. I cerchi sono disponibili in 3 diverse opzioni colore.

*con ruote monoforcina.

Dati tecnici

Per maggiori informazioni su questo modello di carrozzina e per consultare il manuale istruzioni si rimanda al sito di **Invacare**

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza seduta	Altezza schienale	Altezza bracciolo	Inclinazione seduta	Peso totale
Base fissa	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm	440, 460, 480, 500 mm ³	480 mm ³	275 - 340/ 325 - 390 mm	0 - 20°	125 kg ⁹
Seduta telescopica Modulte	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	460, 480, 500 mm ³	480, 540 560 - 660 mm ^{3,6}	245 - 310/ 295 - 360 mm	0 - 20° / 0 - 30° ⁵	126 kg ⁹
Seduta Max	560 - 600 mm	510 - 580 mm	460, 480, 500 mm ³	630 mm ^{3,14}	290 - 360 mm	0 - 12° / 0 - 20° / 0 - 28° ⁵	127 kg ⁹

	Lunghezza pedane	Inclinazione schienale	Larghezza massima	Altezza totale	Lunghezza totale pedane incluse	Lunghezza totale senza pedane	Peso max utilizzatore
Invacare Kite	290 - 470 mm ^{3,4}	90° - 120°	595 mm ⁷	max. 1170 mm ⁸	max. 1140 mm ⁸	max. 870 mm ⁸	136 / 160 kg ¹⁰

	Capacità batteria	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Pendenza max in sicurezza	Potenza motore	Distanza percorribile	Velocità
Invacare Kite	60 Ah / 73 Ah	ca. 1600 mm	60 mm ¹¹	10° / 18% ¹²	2 x 250 W / 2 x 340 W ¹⁰	fino a 39 km ¹³	6 / 10 km/h



matrix
SEATING SERIES

Invacare **Modulte**



- Cuscino seduta da 430 mm
- + 50 mm mediante regolazione del bracciolo
- Misura senza cuscino seduta/rivestimento
- Alcune misure sono disponibili solo per modelli speciali di pedane
- Con basculamento COG o elevazione + basculamento combinati
- In funzione del supporto schienale prescelto
- Con opzione monoforcella
- In funzione della posizione della seduta
- Il peso complessivo dipende dalla configurazione
- Versione HD: motori a 4 poli e centralina da 120A
- 100 mm con dispositivo sali cordolo
- La pendenza max superabile dipende dalla configurazione. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale d'uso.
- Con batterie da 60/73 Ah, 6km/h standard, circa 31 km/39 km
Con batterie da 60/73 Ah, 10km/h standard, circa 34 km/39 km
Con batterie da 60/73 Ah, 6km/h Heavy Duty, circa 27km/35 km
Con batterie da 60/73 Ah, 10km/h Heavy Duty, circa 25 km/31 km
- 100 mm aggiuntivi per la regolazione in altezza
- I componenti della seduta Modulte sono compatibili con tutti i modelli di carrozzine elettroniche Invacare e solo in parte con i prodotti della gamma Invacare Rea®

I nome, il marchio e i loghi LiNX sono marchi commerciali registrati di proprietà di Dynamic Controls; l'utilizzo degli stessi da parte di Invacare è regolato da contratto di licenza.

Colori Carenatura

Blu notte perlato	Argento metallo	Nero	Rosso Ciliegia trasparente	Bianco Artico	Giallo tramonto	Verde lime	
							Non dimenticare che puoi personalizzare la tua Kite con il servizio UNIQUE

Colori telaio

Nero	Bianco Artico

Colori Cerchi

Bianco	Argento	Nero



Scan here to access the **LiNX** website.

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®