



Invacare[®] | **Matrix[®] Elan**

Unità posturale per il capo

matrix[®]
SEATING SERIES

Trusted Solutions,
Passionate People

INVACARE
Yes, you can.[®]


Grazie al design compatto, leggero e altamente regolabile, l'elegante appoggiatesta *Invacare Matrix® Elan*, porta il nostro range di prodotti posturali ad un livello superiore. Questo modello offre un ottimo supporto e un elevato livello di comfort sia con con pazienti in età evolutiva che adulti. Gli aspetti chiave sono:

- **Molteplici possibilità di regolazioni**
- **Ampia gamma di imbottiture**



Supporto altamente regolabile

- L'esclusivo Sistema di aggancio dell'appoggiatesta Elan garantisce ben sei punti di regolazione per dare svariate opportunità di posizionamento, inclusa la funzione swing-away, per rispondere ai bisogni di ogni singolo paziente.
- L'appoggiatesta può essere regolato velocemente e con estrema facilità con una sola chiave mentre l'esclusivo sistema di serraggio multi-disco garantisce una tenuta superiore e quindi un elevato livello di affidabilità nel tempo.
- Le regolazioni principali si effettuano senza l'ausilio di attrezzi rendendo semplici i riposizionamenti dell'appoggiatesta.
- Due versioni:
 - adulto (altezza supporto 380 mm)
 - bambino (altezza supporto 280 mm)entrambi compatibili con le diverse imbottiture **Matrix** e con varie imbottiture presenti sul mercato.

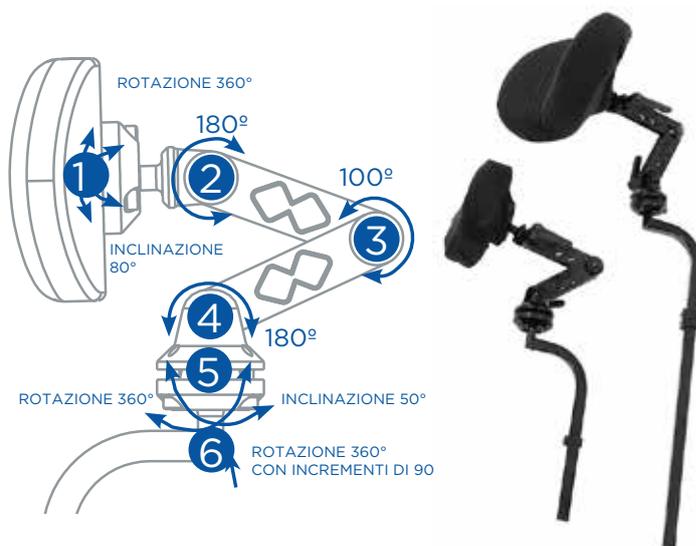

Imbottiture disponibili



Ellittica

Possono essere modellate per un migliore supporto del capo. Disponibili in tre misure: 150 x 90 mm, 250 x 130 mm e 360 x 130 mm.



Occipitale

Offrono un supporto avvolgente per l'area occipitale e sub occipitale del capo. Disponibili in due misure: 230 x 180 mm e 310 x 200 mm.



Quattro punti

Offre un supporto a 4 punti per l'area occipitale e temporale del capo. Disponibile nella misura 280 x 260 mm.

Caratteristiche

Fodera in due tessuti

La fodera standard (Startex) è provvista di doppia zip ed è impermeabile e traspirante. L'altra versione è pensata per ridurre la carica batterica (reverse Startex). Entrambe le fodere sono facili da rimuovere.



Regolazioni senza attrezzi

- 1 Le levette di regolazione permettono di cambiare la posizione con estrema facilità. Fornite anche delle viti per un posizionamento fisso.
- 2 Grazie alla nuova manopola ergonomica risulta veloce sia la rimozione dell'appoggiatesta che la regolazione in altezza.

Imbottitura a doppia densità

L'imbottitura a doppia densità garantisce una eccellente immersione, alto comfort e protezione per l'utilizzatore. Le imbottiture Invacare **Matrix** sono più leggere del 50% delle imbottiture presenti sul mercato.



Speciale interfaccia

E' disponibile un'interfaccia che lo rende compatibile con gli schienali delle carrozzine Rea.



Staffa multi disco

L'innovativa staffa 'multi disco' garantisce una tenuta superiore.



Supporto in alluminio

Può essere modellato molto facilmente.



Una famiglia di prodotti

Invacare offre una vasta gamma di soluzioni per la riabilitazione: cuscini, schienali, supporti, cinture a bretellaggio e appoggiatesta.

Dati tecnici

Per informazioni più complete su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, consultate il nostro sito www.invacare.it

Staffa di aggancio

Staffa di aggancio Standard Elan	380 mm
Staffa di aggancio Mini Elan	280 mm

Imbottiture


Imbottitura Ellittica 150mm	150 x 90 mm
Imbottitura Ellittica 250mm	250 x 130 mm
Imbottitura Ellittica 360mm	360 x 130 mm
Imbottitura Occipitale 230mm	230 x 180 mm
Imbottitura Occipitale 310mm	310 x 200 mm
Imbottitura a 4 punti	280 x 260 mm



Fodere

Startex

Antibatterica

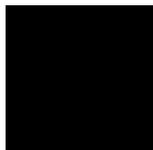

Nr. repertorio DM: 1522491/R

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®

