

RETE LARGA 120CM!

CONFORME A IEC 60601-2-52



Più grande, più ampio, più comodo....

Invacare **SB755 Wide** è la soluzione ideale!

SB755 Wide è il letto ideale perché unisce al comfort per il paziente, funzionalità e praticità per l'assistente. Particolarmente indicato sia per l'ambiente istituzionale che domestico. La rete del letto è stata pensata per ridurre al minimo le forze di frizione sulle zone sensibili. Ora disponibile anche nella versione con larghezza del piano rete 120 cm per pazienti fino a 200 kg di peso. Il letto è conforme alle nuove direttive IEC 60601-2-52.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Comfort assicurato

Grazie alla particolare geometria del piano rete, il letto **SB755 Wide** rende più confortevole la posizione seduta riducendo al minimo le forze di frizione e di scivolamento. E' particolarmente indicato in tutti quei casi in cui è richiesto un allungamento della rete: è possibile, infatti, aumentarne la lunghezza di 10 cm per lato (testa e piedi, a passi di 5 cm). Ogni rete è provvista di due archetti per sostenere il materasso ed evitare il rischio di intrappolamento.

Funzionale e pratico!

Il letto **SB755 Wide** può essere facilmente montato e smontato senza l'ausilio di attrezzi. Nella configurazione standard è proposto con pannelli modello Susanne, pulsantiera modello 'Soft' e sponde Britt a 3 barre, colore faggio. Numerosi accessori disponibili: asta porta telecomando, maniglie di supporto, etc.


Caratteristiche e Opzioni



Pulsantiera 'soft'

Pulsantiera di facile utilizzo perchè ogni pulsante colorato ha una sola funzione e può essere attivato indipendentemente dalla posizione di partenza:

- verde per la posizione seduta;
- rosso per la posizione riposo;
- giallo per la discesa dal letto.

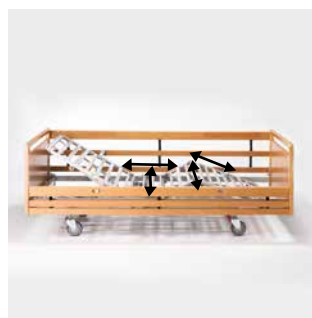

Le dimensioni delle sezioni del piano rete sono ottimizzate per evitare l'effetto scivolamento e per ridurre le forze di frizione.



Di serie la rete è **allungabile di 10 cm per lato** e per sorreggere il materasso è possibile utilizzare i due archetti anch'essi in dotazione. Sono inoltre disponibili le sponde Line allungabili telescopicamente.

Dati tecnici

SB 755 Wide 1200 mm	Larghezza esterna: 1300 mm Larghezza interna: 1200 mm	Lunghezza esterna: 2130 mm Lunghezza interna: 2080 mm Materasso: 2000 mm	Regolazione altezza: 350 - 820 mm Altezza totale: 1600 - 2070 mm	Dimensioni della rete: 810 - 250 - 270 - 670 mm	Spazio utile: 170 mm	0° - 73° Angolo alzatasta
						Conforme alla norma per la sicurezza dei letti medici IEC 60601-2-52
SB 755 Wide	0° - 16° Angolazione alzapiedi verso il basso	0° - 18° Angolo poggiatesta	25° (Angolazione sotto il telaio) 14° (Angolazione sopra il telaio)	SWL 235 kg Peso massimo utente 200 kg	Utenti Bariatrici	

NB/ Il letto non deve essere utilizzato da utenti sotto i 12 anni di età, o da utenti con dimensioni del corpo equivalenti o inferiori ai 12 anni.

Colori e componenti in legno



Grigio alluminio



Faggio