

Imbracature Invacare



Comfort e sostegno ottimali




Un'ampia gamma di imbracature per assicurare il sostegno ideale

La nostra nuova gamma di imbracature è stata progettata per assicurare all'utilizzatore, durante i trasferimenti, il necessario sostegno, la piena sicurezza e il massimo del comfort. La nostra offerta comprende numerosi modelli, in diverse misure e tessuti, per offrire ad ogni paziente l'imbracatura giusta. Le soluzioni proposte vengono in aiuto sia di quanti presentino solo una leggera difficoltà motoria, che di quanti necessitino di un sostegno completo per il corpo e il capo.

Il nostro team di esperti e terapisti occupazionali ha dedicato tempo e risorse per mettere a punto una serie di imbracature dall'utilizzo intuitivo, pratiche da gestire per gli assistenti. Ciò si traduce in una riduzione dei tempi di applicazione e in una maggior fiducia rispetto all'ausilio.

La gamma delle imbracature Invacare si articola in 15 modelli, ciascuno disponibile in sei taglie diverse, con tre alternative di tessuto tra cui scegliere. Ogni paziente potrà quindi trovare l'imbracatura che fa al caso proprio, per qualsiasi tipologia di utilizzo: trasferimenti quotidiani dal letto alla carrozzina/poltrona, verso il WC, la vasca da bagno o la doccia.

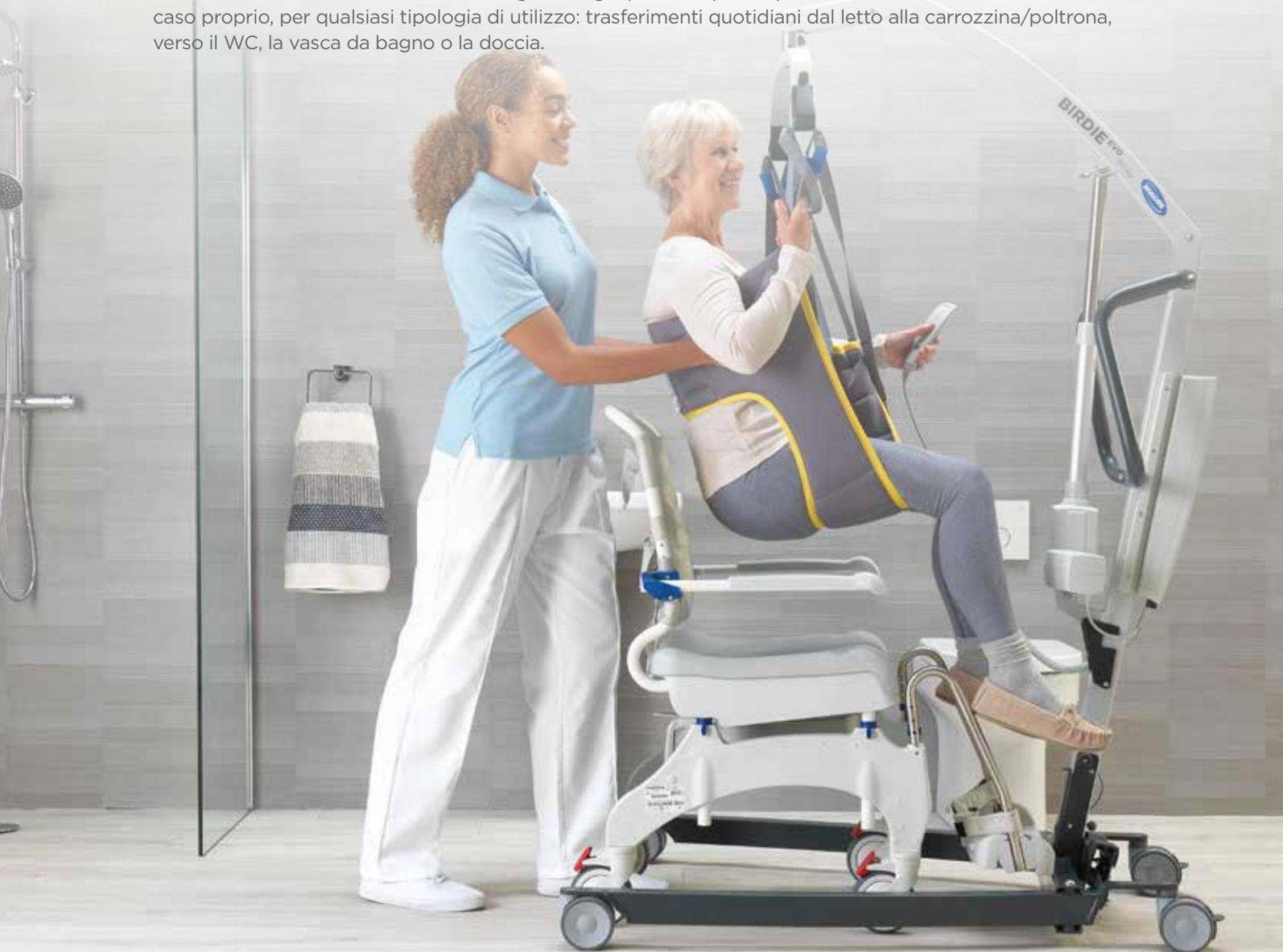

4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



◀ Vestibilità ottimale

- ▶ L'imbracatura giusta per ogni tipo di paziente e di trasferimento
- ▶ Gamma amplissima: 15 modelli, 6 misure e 3 tessuti
- ▶ Modelli di imbracatura studiati nel dettaglio per assicurare il giusto sostegno alle diverse parti del corpo
- ▶ Tutte le imbracature sono dotate di attacco ad asola per garantire un'elevata compatibilità con bilancini e sollevatori

Sicurezza e affidabilità al top ▶

- ▶ Video esplicativi accessibili via QR code
- ▶ Etichette con disegni chiari e intuitivi per illustrare le modalità di utilizzo
- ▶ Materiale ritardante di fiamma, certificato ed ecologico, per le imbracature Comfort In Situ



◀ Comfort ottimale

- ▶ Materiali soffici al tatto per migliorare il grado di comfort
- ▶ Le sezioni che sostengono schiena e gambe sono imbottite per un'ottimale distribuzione del peso
- ▶ Morbida imbottitura in corrispondenza della zona di appoggio delle ascelle, un punto particolarmente sensibile

Facili da applicare ▶


- ▶ Tasche di posizionamento da far scorrere tra il paziente e lo schienale quando il paziente è seduto per facilitare l'applicazione
- ▶ Due riferimenti identificano la mezzeria dell'imbracatura e indicano la posizione corretta rispetto alla colonna vertebrale
- ▶ Asole colorate facilitano il corretto posizionamento



Come scegliere il modello giusto

L'imbracatura "giusta" è quella in grado di **assicurare il necessario sostegno proprio dove serve**. Le **imbracature Invacare** sono state progettate per sostenere il paziente che manifesti uno scarso controllo a livello di determinate parti del corpo o un tono muscolare ridotto. Nella scelta dell'imbracatura è importante considerare in particolare la capacità di controllo, da parte del paziente, di gambe, anche, busto e capo. La tabella seguente illustra i diversi modelli di imbracature, associandoli alle caratteristiche fisiche e alle capacità funzionali dell'utilizzatore.

Controllo del corpo. Valutazione ▼

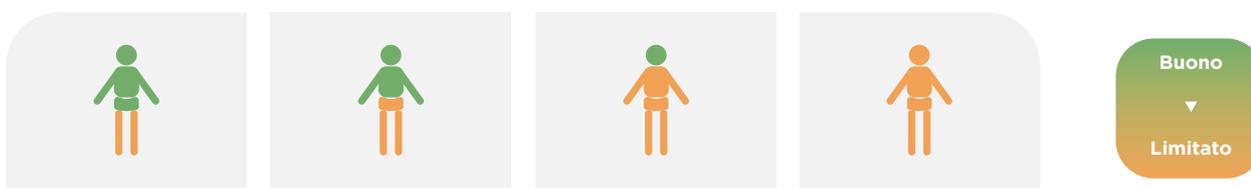

Grado di sostegno garantito dai diversi modelli di **Imbracature Invacare** ▼

Molto leggero ▼	Leggero ▼	Intermedio ▼	Completo ▼	Usso previsto
	Universal Low	Universal Standard	Universal High Universal High Plus	Universal Standard
		Amputee	Easy-Fit	Meno consigliato* Ottimale
		Comfort Standard Comfort In Situ	Comfort High	
Dress Toileting Low Dress Toileting High Light Transfer Support Standing Transfer Vest				
Standing Transfer Vest with Groin band Stand Assist				
Transfer Stand Assist				


***Meno consigliato**
E' importante considerare che le capacità funzionali del paziente sono maggiori rispetto a quelle che l'imbracatura gli consentirà di utilizzare. Pertanto, tali capacità rimarranno immobilizzate per un certo periodo di tempo. L'imbracatura, inoltre, è realizzata con più tessuto di quello effettivamente necessario per il paziente e pertanto l'applicazione risulterà meno agevole.

Come scegliere la misura giusta

Per scegliere la misura giusta dell'imbracatura occorre considerare principalmente la distanza tra le anche e l'altezza della schiena del paziente in posizione seduta. Se l'imbracatura prevede una cintura, è importante valutare anche la circonferenza della vita.

Il peso del paziente incide meno nel determinare la misura corretta dell'ausilio, ma va considerato per garantire l'utilizzo in sicurezza dell'imbracatura, confrontandolo con la portata utile massima di quest'ultima.

Per conoscere tutte le misure disponibili nei diversi modelli si rimanda alla Guida alla Scelta delle Imbracature di Invacare

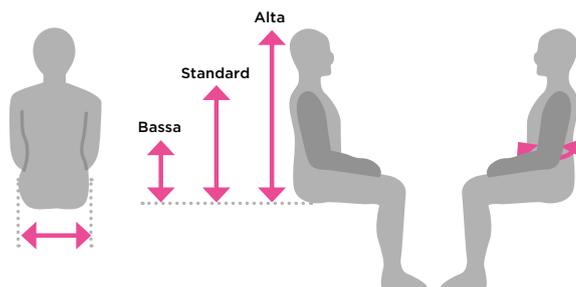

Misura	XS	S	M	L	XL	XXL
Carico utile (in sicurezza)	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Imbracature Invacare per sollevatori passivi

La famiglia delle imbracature Universal

Imbracature pensate per una gestione a 360° della routine quotidiana dei pazienti.



◀ Universal Low

- Sostiene le anche e la zona lombare
- Adatta per utenti con buon controllo del tronco e del capo
- Utilizzabile per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta



◀ Universal Standard

- Sostiene tutto il corpo, incluse le spalle
- Adatta per utenti con un buon controllo del capo
- Utilizzabile per trasferimenti da posizione supina, sollevamenti da pavimento e trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta



◀ Universal High

- Sostiene tutto il corpo, incluso il capo
- Il paziente viene mantenuto in posizione seduta, leggermente reclinato
- Adatta per utenti con limitato controllo del capo, del tronco e delle anche
- Utilizzabile per i trasferimenti da posizione supina, per il sollevamento da pavimento e per il trasferimento da posizione seduta a posizione seduta



◀ Universal High Plus

- Stesse caratteristiche della Universal High, ma consente al paziente di tenere le braccia fuori dall'imbracatura ed essere più interattivo

Imbracature con apertura più piccola

Per pazienti che necessitano di un'imbracatura con un'apertura minore



◀ Amputee

- Sostiene cosce e tronco
- Adatta per pazienti con singola o doppia amputazione e un buon controllo del capo
- Non adatta per pazienti a rischio di spasmi
- L'utilizzatore rimane seduto in posizione leggermente reclinata
- Utilizzabile per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta e da posizione supina a posizione seduta.



◀ Easy-Fit

- Sostiene tutto il corpo e il capo
- Adatta per pazienti con limitato controllo del capo, del tronco e delle anche
- I supporti separati per le gambe la rendono più semplice da applicare rispetto alle imbracature Comfort
- Assicura una buona posizione delle anche per consentire al paziente di mantenere, da seduto, una posizione relativamente eretta

Imbracature con un'apertura più ampia

L'apertura maggiore agevola le operazioni di toeletta e rende più semplice l'applicazione.



◀ Dress Toileting Low

- Adatta per pazienti con un buon controllo delle anche, del busto e del capo
- La cintura assicura maggior sostegno attorno al corpo e un posizionamento sicuro.
- Utilizzabile per trasferimenti da posizione seduta a posizione seduta



◀ Dress Toileting High

- Stesse caratteristiche della Dress Toileting Low, con l'aggiunta di stecche di supporto a livello della testa per i pazienti che hanno un controllo limitato del capo

La famiglia delle imbracature Comfort

Imbracature ad amaca, ideali per pazienti con dolore cronico; questa tipologia di imbracature è comoda anche per coloro che abbiano subito amputazioni sopra il ginocchio. Il modello Comfort In Situ è la soluzione ideale nei casi in cui sia necessario mantenere l'imbracatura sotto il paziente una volta completato il trasferimento in posizione seduta.



◀ Comfort Standard

- Sostiene tutto il corpo
- Adatta per pazienti con un buon controllo del capo
- E' dotata di comode maniglie



◀ Comfort High

- Sostiene tutto il corpo, compreso il capo
- Adatta per pazienti con limitato controllo del capo, del tronco e delle anche
- E' dotata di comode maniglie



◀ Comfort In Situ

- Sostiene tutto il corpo
- Adatta per pazienti con un buon controllo del capo
- Senza maniglie, per poter rimanere posizionata sotto il paziente una volta completato il trasferimento
- Realizzata in materiale speciale, certificato, ritardante di fiamma in tutti e tre i tessuti: compatto, spacer e rete.
- Ecologica
- Conforme alla normativa EN 1021 parte 1 e 2



Fasce di sollevamento

Adatte per trasferimenti veloci, utilizzabili da sole o in combinazione con le imbracature per assicurare maggior sostegno nel sollevamento di braccia o gambe.



◀ Light Transfer Support

- Adatte per pazienti con buon controllo del corpo e del capo
- Utilizzabili per trasferimenti da posizione seduta
- Possono essere usate come fasce di sollevamento per sostenere braccia o gambe individualmente o come rinforzo in associazione ad un'altra imbracatura

Imbracature per la deambulazione

Facili da mettere e togliere, consentono di scaricare parzialmente il peso corporeo per gli utenti più attivi.



◀ Standing Transfer Vest

- Si applica attorno ai fianchi del paziente, che deve riuscire a stare con i piedi saldamente a contatto con il pavimento
- Adatta per pazienti che riescono a mantenere la posizione eretta, ma hanno scarso equilibrio e/o capacità di deambulazione
- Accessori: fascia pelvica per stabilizzare l'imbracatura e aumentare la sicurezza del paziente

Imbracature Invacare per sollevatori attivi



◀ Stand Assist

- Adatta per pazienti che hanno una residua capacità di sostegno, ma non riescono a mantenere autonomamente la posizione eretta.
- Il paziente deve essere mentalmente lucido e avere un buon controllo del corpo e del capo
- Soffice imbottitura per assicurare maggiore comfort
- Materiale antiscivolo per aumentare la sicurezza durante il trasferimento



◀ Transfer Stand Assist

- Stesse caratteristiche del modello Stand Assist, ma con in più il supporto per le gambe

Accessori ▼



Prolunga asole

- ▲ Per allungare le asole di fissaggio ed aumentare le possibilità di posizionamento. Disponibile in due varianti: da 20 e 30 cm



Marcatore asola

- ▲ Per identificare agevolmente le regolazioni di fissaggio delle asole, dopo una valutazione individuale. Fornite in pacchi da 4 pz.

Misure e Tessuti ▼


▼ Famiglia	▼ Modelli	▼ Taglie						▼ Tessuti		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Compatto	Rete	Spacer
Universal	Universal Low	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	●	●
	Universal High Plus	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
Apertura piccola	Amputee	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Easy Fit	◆	◆	◆	◆	◆		●		●
Apertura più ampia	Dress Toileting Low	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Dress Toileting High	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Comfort	Comfort Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort High	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort In Situ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●🔥	●🔥	●🔥
Fasce di sollevamento	Light Transfer Support		◆		◆			●		
Imbracatura per la deambulazione	Standing Transfer Vest	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Imbracature per sollevatori attivi	Stand Assist	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆		●		

Tessuti ▼



Compatto

▲ Materiale che resiste all'usura del tempo, semplice da applicare e disporre: si asciuga in fretta dopo il lavaggio. Di serie su tutti i modelli.

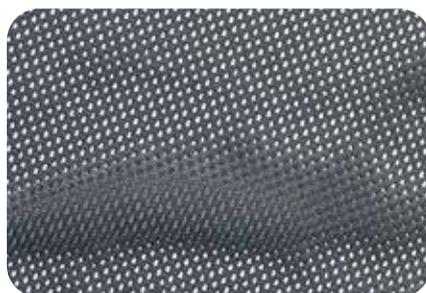

Rete

▲ Tessuto con trama a rete, perfetto per il bagno o la doccia; l'acqua scorre sul tessuto, consentendogli di asciugare molto rapidamente.



Spacer

▲ Tessuto traspirante e bielastico, soffice al tatto, che si adatta alla forma del corpo dell'utilizzatore, assicurandogli il massimo del sostegno e del comfort.

Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni su questo prodotto e per scaricare il manuale utente visita il sito Invacare.



Peso massimo utente ▼

Invacare Imbracature

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg



90° C



Non candeggiare



Bassa temperatura

Tutte le imbracature dovrebbero essere testate e regolate in modo specifico per ogni utilizzatore, così da assicurare un ottimo comfort e la massima sicurezza durante i trasferimenti.

Prima di utilizzare l'imbracatura di un determinato produttore su un sollevatore di marca diversa è necessario eseguire una valutazione dei rischi.

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®