

matrx[®]
SEATING SERIES

Schienali Serie E2



Invacare[®] **Matrx[®]** Schienali Serie E2[™]

INNOVAZIONE | COMFORT | LIBERTA'



Il supporto posturale che consente di muoversi in autonomia

Lo Schienale Posturale E2 è l'ultima novità in casa Invacare per quanto riguarda i sistemi di postura: un supporto eccezionale per pazienti a mobilità limitata, si monta facilmente grazie ai perni di fissaggio di cui è dotato. Lo Schienale Posturale E2 è disponibile in una vasta gamma di larghezze e altezze per garantire una funzionalità ottimale. Il poliuretano espanso di ultima generazione utilizzato per le imbottiture assicura la termoregolazione e un livello di comfort e supporto senza precedenti.

Design ergonomico

Il nuovo design ergonomico della scocca offre un ottimo supporto al bacino e un'elevata distribuzione delle pressioni, favorendo così stabilità ed equilibrio.




Scocca

- ▶ Finestre di controllo e di aerazione
- ▶ Regolazione in altezza stepless
- ▶ Area di scarico sacrale
- ▶ Predisposizione fori per fascia addominale PostureFlex



Poliuretano espanso di ultima generazione

La superficie ondulata aumenta il ricambio dell'aria e favorisce la traspirabilità, la termoregolazione e la riduzione dell'umidità. L'imbottitura in schiuma ad alta resilienza assicura un elevato grado di comfort e una gestione delle forze di taglio a carico dei processi vertebrali.

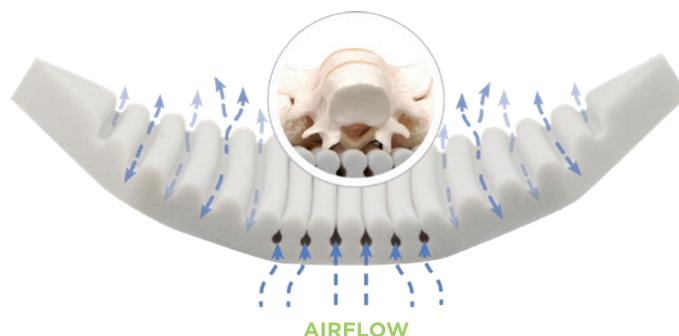

Fodera

- ▶ Fodera in Meshtex™ resistente all'umidità e traspirante
- ▶ Imbottitura e fodera progettate per garantire protezione e comfort



Sistemi di Aggancio

Gli schienali si montano sulla carrozzina e vengono assicurati in posizione grazie ad un pratico sistema con perni di fissaggio. L'attacco è pensato per rispondere alle esigenze di corporature e taglie differenti; le regolazioni possono essere eseguite anche con l'utilizzatore seduto sulla carrozzina. Tutte le regolazioni sono stepless e non interferiscono con la profondità della seduta della carrozzina.



Perni di fissaggio

- ▶ Regolabili in larghezza e altezza
- ▶ Si adattano a carrozzine della stessa misura o 2.5cm più larghe / più strette
- ▶ L'altezza dello schienale è regolabile anche con il paziente seduto sulla carrozzina
- ▶ Attacco MiniSet su schienali con altezza fino a 41 cm; EasySet per altezze schienale da 46/51cm

Lo schienale Matrix E2 è disponibile in due profondità



Specifiche Prodotto

- ▶ Larghezza: 36/38/41/43/46/48/51cm
- ▶ Altezza: NOVITA' 15/ 20/26/31/36/41/46/51cm
- ▶ Peso max utente: 136kg.

▲ Schienale E2

E2 Standard-profondità 8cm

▲ Schienale E2 Deep

E2 Deep - profondità 15cm



Pelotte toracali Easy Fix

- ▶ Le pelotte toracali fisse si possono montare all'interno o all'esterno della scocca
- ▶ Regolabili in altezza, anche ad altezze differenti (offset)
- ▶ Compatibili con schienali sagomati E2 standard-altezza 26cm e superiori

Montaggio interno



Montaggio esterno



Pelotte toracali girevoli

- ▶ Il modello Standard è compatibile con schienali E2 da 26cm e superiori; la versione Offset con schienali da 31cm e superiori
- ▶ Imbottitura disponibile in 4 misure: XS / S / M / L

Una gamma completa di accessori ▼



▲ Supporto lombare

Il supporto lombare agisce sul bacino per favorire una postura corretta.

- sagomato per accomodare SIPS e regione sacro lombare.
- può essere tagliato a misura.



▲ Matrix Fodera protettiva

Per la protezione dello schienale. Semplice da pulire con disinfettanti omologati per un maggior grado di igiene. Facile da applicare e da rimuovere in caso di lavaggio



▲ PostureFlex Fascia di supporto addominale

Progettata per dare supporto-pressione intraddominale per un maggior controllo della voce e del respiro. Assicura anche un confortevole supporto posturale senza limitare i movimenti.

Pratico sistema di aggancio

- Può essere montata a 3 diverse altezze utilizzando i fori predisposti sulla scocca.
- Disponibile in due misure: M / L



▲ Piastra di aggancio per appoggiatesta

Piastra di aggancio appoggiatesta; può essere montata senza bisogno di sfilare la fodera. Di serie con tutti gli schienali a partire da 36 cm di altezza. Optional su richiesta: attacco poggiatesta extra strong in acciaio per maggior sostegno o applicazioni Heavy Duty.



▲ Piastra di aggancio bretellaggio per il tronco

Piastra di aggancio per il posizionamento corretto del bretellaggio per il tronco

Modelli:

E2CHI-S: schienali L. 36/38cm
E2CHI-M: schienali L.da 41 a 51cm



▲ Matrix telino "Privacy flap"

Pensato per coprire la zona libera tra schienale e cuscino. Si fissa facilmente grazie ai velcro.

Disponibile in 4 misure :
XS / S / M / L

SISTEMI DI AGGANCIAMENTO

Per assicurare la massima compatibilità con le carrozzine:

Standard



MiniSet:

- ▶ di serie su tutti gli schienali E2/E2D fino a 41cm di altezza



EasySet:

- ▶ di serie su tutti gli schienali E2/E2D da 46cm & 51cm

Optional



MiniSet fisso:

- ▶ Sistema di aggancio fisso che richiede l'ausilio di utensili per essere smontato / basculamento
- ▶ Optional per schienali E2/E2D fino a 41cm di altezza



EasySet fisso:

- ▶ Sistema di aggancio fisso che richiede l'ausilio di utensili per essere smontato;
- ▶ Optional per schienali E2/E2D fino a 46cm & 51cm



Aggancio Split:

- ▶ nel caso di schienali regolabili in altezza
- ▶ Optional per schienali E2/E2D solo con aggancio Easy Set, non compatibile con MiniSet



MiniSet HeavyDuty:

- ▶ Raccomandato per pazienti con elevato tono muscolare o utilizzo intensivo



EasySet Heavy-Duty:

- ▶ Raccomandato per pazienti con elevato tono muscolare o utilizzo intensivo

Regolazioni: in inclinazione fino a 40°, in profondità +/- 5cm rispetto ai tubi schienale.

La profondità può essere regolata in maniera asimmetrica, per accomodare o correggere rotazioni di bacino/ tronco
Adatto a tubi: schienale di diametro 25mm, completo di riduttori per diametro 19mm e 22 mm.

Un'intera famiglia di prodotti

Invacare propone una gamma completa di supporti posturali



Cintura **Bodypoint**
BP Bodypoint
STRENGTHEN YOUR POSITION



Cushion **Invacare Matrix* Libra**
matrix*
LIBRA



Poggiatesta **Invacare Matrix* Elan**
matrix*
SEATING SERIES

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

INVACARE
Yes, you can.®