

matrix[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}



Si adatta alla forma del
corpo dell'utilizzatore

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

Matrx Contour Visco^{NG} di Invacare e' un cuscino antidecubito, anatomico e sagomato, realizzato al 100% in viscoelastico. Assicura un'ottimale redistribuzione delle pressioni di carico, un maggior grado di comfort e un'elevata stabilità pelvica. Grazie all'altezza ridotta favorisce la propulsione con l'arto inferiore e l'accesso ai tavoli, anche quelli più bassi.


Sagomatura posteriore

► La speciale sagomatura del cuscino assicura un supporto supplementare dietro il bacino del paziente, favorendo così un posizionamento pelvico ottimale. Questa soluzione consente di infilare il cuscino sotto il rivestimento dello schienale o sotto uno schienale rigido per colmare il vuoto che si viene solitamente a creare con i cuscini a taglio quadrato. Massimizzando la superficie di contatto, inoltre, si migliora la distribuzione delle pressioni e si riduce il rischio di lesioni della cute.



Taglio anteriore a cascata

► Assicura un elevato supporto a livello delle cosce, migliorando il posizionamento delle gambe e la redistribuzione del carico pressorio, senza compromettere l'articolazione del ginocchio a livello della regione poplitea. Il bordo anteriore a cascata è funzionale anche per utenti con marcata flessione degli arti inferiori nell'ottica di massimizzare la superficie di contatto. Agevola inoltre la spinta podale.

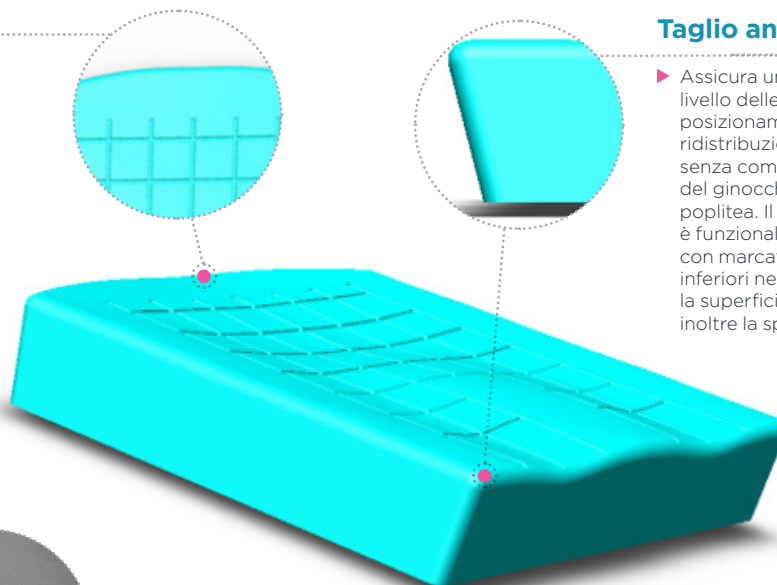

► Il cuscino **Matrx Contour Visco^{NG}** accoglie e avvolge il paziente nella sua imbottitura in schiuma viscoelastica, materiale che, adattandosi gradualmente alla forma del corpo dell'utilizzatore, va ad aumentare la superficie di contatto e redistribuire la pressione di carico sul cuscino.

Matrx Contour Visco^{NG} è disponibile in un'ampia gamma di misure e portanze, per soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti. Viene fornito completo di due fodere a doppia chiusura (doppia zip), facili da togliere per il lavaggio e per la manutenzione. Le fodere sono impermeabili ai liquidi e bielastiche, per consentire all'utilizzatore di immergersi completamente nel cuscino. La forma della base assicura una posizione stabile, evitando lo scivolamento in avanti del paziente; le pratiche maniglie consentono di trasferire agevolmente il cuscino da una superficie all'altra.

Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni su questo prodotto e per scaricare il manuale utente visita il sito [Invacare](http://Invacare.com).

								
	Larghezza ▼	Profondità ▼	Altezza ▼	Altezza ▼	Peso totale prodotto ▼	Peso max utilizzatore ▼	Temperatura max lavaggio ▼	
Matrx Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°	

Il cuscino è conforme alle normative EN1021-1 Cig e EN1021-2 Match

*Per cuscini con larghezza seduta compresa tra 380 e 405 mm., il peso min. dell'utilizzatore è 40 kg. Per cuscini con larghezza seduta da 430 mm e superiore, il peso min. dell'utilizzatore è 60 kg

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy