


Softform[®] Premier

Materasso antidecubito per la redistribuzione della pressione

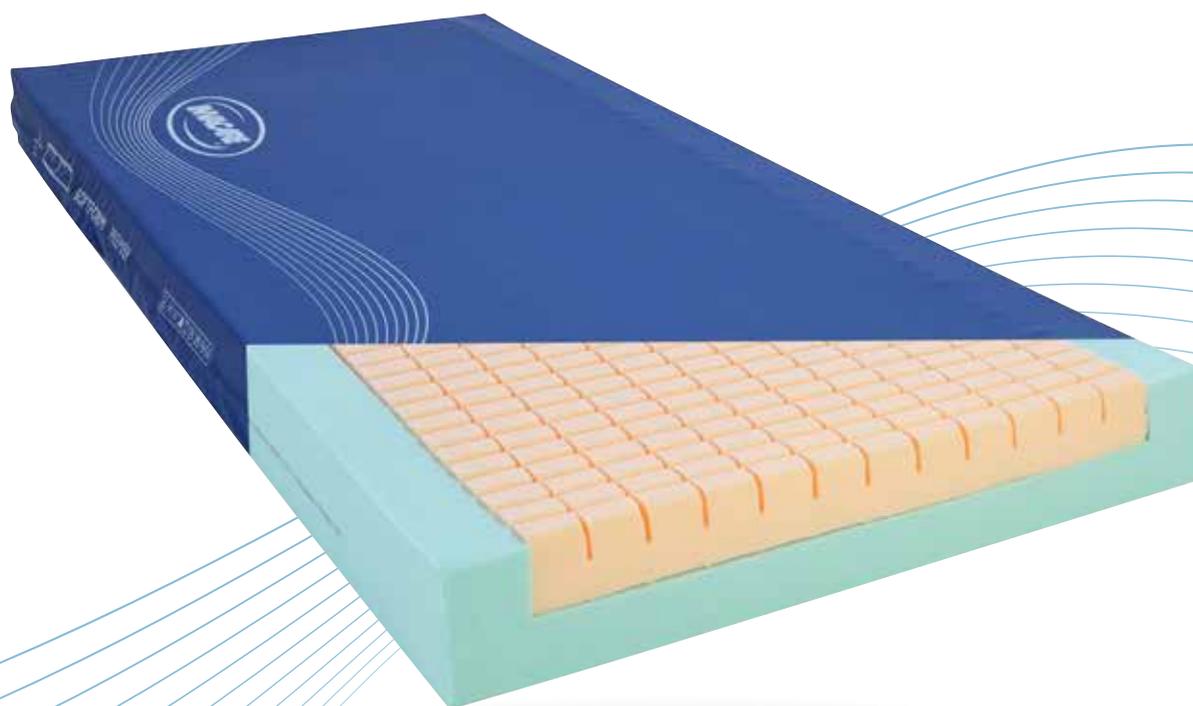


Yes, you can.[®]

Un efficace aiuto nella prevenzione delle ulcere da pressione

Il modello Softform Premier è un materasso antidecubito di alta gamma, ideale sia per l'ambiente ospedaliero che domiciliare. Pratico e resistente, questo modello garantisce un eccezionale livello di comfort e un'ottima distribuzione della pressione.

Il materasso Softform Premier è dotato di un originale inserto superiore in schiuma, lavorato a goccia, che si adatta perfettamente al movimento del corpo, riduce le forze di frizione e taglio e garantisce un microclima ideale.

Presenta una fodera impermeabile multi elastica che riduce le forze di taglio e frizione. E' in poliuretano con cuciture ad alta frequenza e un bordo copri zip lungo tutto il perimetro, per ridurre il rischio di ingresso dei liquidi. La base più spessa di colore grigio garantisce una migliore resistenza nel tempo su qualsiasi tipo di rete.

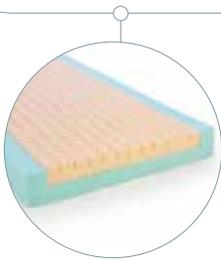

Nucleo in schiuma con base a U

- La base a U aumenta il sostegno laterale, facilita il riposizionamento e limita lo scivolamento laterale.




Bordo copri- cerniera

- Il bordo copri-zip lungo tutti i lati riduce il rischio potenziale di ingresso dei liquidi, preservando la qualità e l'integrità della schiuma da possibili contaminazioni.



Corretto posizionamento

- Questo simbolo offre la garanzia che il materasso è correttamente posizionato sul letto.

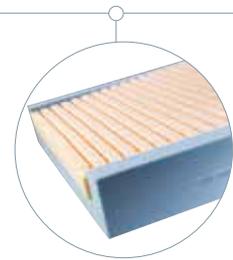

Superficie inclinata nella zona del tallone

- La superficie superiore del materasso è leggermente inclinata sulla parte finale per alleviare la pressione sui talloni, particolarmente vulnerabili alle lesioni da pressione.

Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito www.invacare.it



Larghezza ▼

660 - 900 mm
910 - 1370 mm
1380 - 1525 mm



Altezza ▼

152 mm



Lunghezza ▼

1410 - 2100 mm



Peso ▼

13 kg



Peso utilizzatore ▼

247.6 kg



Temperatura di lavaggio ▼

95 °C



Blu baltico

Colore

Prodotto secondo gli Standard Europei:
BS EN 597-1 Cig,
BS EN 597-2 Match.
Schiuma interna:
BS 5852: 1990 Crib Source 5; Cover BS7175:
1989 Crib Source 5.

1. L'assistenza infermieristica è un elemento chiave nella prevenzione delle piaghe da decubito. Questo materasso può dare un contributo positivo se utilizzato all'interno di un piano di prevenzione delle ulcere da pressione complessivo. Formazione, valutazione clinica e pianificazione di attività basate sulla vulnerabilità, sono fattori fondamentali nella gestione delle ulcere da pressione. Esistono diverse scale di rischio che aiutano nel processo formale di individuazione del livello di rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Tuttavia accanto alla valutazione formale, è consigliato tenere conto anche della valutazione da parte personale infermieristico (valutazione informale).

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 THIENE (VI) - Italy



Yes, you can.®