



scalamobil®



Sali e scendi in sicurezza

scalamobil – il montascale unico, innovativo e sicuro.



www.alber.de



Scala, al tuo servizio.

Nella mobilità quotidiana le scale possono spesso rappresentare un ostacolo insormontabile. Di conseguenza, interi piani delle abitazioni possono restare completamente inutilizzati, o addirittura si potrebbe essere costretti a cambiare casa. Inoltre, non è facile neppure per gli assistenti e familiari gestire la movimentazione su e giù per le scale. I montascale fissi richiedono interventi di installazione e ristrutturazione complessi e costosi e non sono sempre adatti a ogni tipo di scala o contesto.

Grazie a Scalamobil, le limitazioni delle scale vengono facilmente superate. Non sono necessari interventi invasivi, perché scalamobil affronta tutti i tipi di scale.

Utenti e caregiver potranno sperimentare i vantaggi di un prodotto realmente innovativo per tornare a svolgere le proprie attività quotidiane con indipendenza e flessibilità.

Scalamobil è la scelta giusta se:

- ✓ hai bisogno di accedere ai piani superiori della tua casa.
- ✓ vuoi garantire la sicurezza sia degli utenti che degli operatori.
- ✓ cerchi una soluzione di mobilità che non richieda modifiche strutturali.
- ✓ preferisci un ausilio per la salita/discesa che ti consenta di utilizzare la tua carrozzina.
- ✓ hai bisogno di un ausilio per la salita/discesa anche e non usi abitualmente una carrozzina.
- ✓ cerchi una soluzione facile.
- ✓ vuoi agevolare il compito al partner e ai familiari.





Vivi la tua casa.

SICURO

Semplice e affidabile

Semplicità e sicurezza sono i punti chiave dei modelli Scala. Scalamobil è affidabile, pratico e maneggevole, le operazioni di movimentazione sono sicure ed intuitive grazie alla collaudata tecnologia Alber.

Il monitoraggio automatico dell'inclinazione e molte altre funzionalità intelligenti lo rendono sicuro su tutti i tipi di scale.

- ✓ **Stabilità:** poggiapiedi e braccioli robusti
- ✓ **Controllo:** display di comando intuitivo
- ✓ **Versatilità:** diverse modalità di guida intelligenti, immobilizer e interruttore di emergenza



MOBILITÀ

versatile & flessibile

Lo Scalamobil è adatto a tutti i tipi di scale e può essere adattato alle più diverse esigenze. Un beneficio sicuro per il vostro stile di vita.

Scalamobil può essere facilmente smontato in due parti per agevolare il trasporto. Si aggancia facilmente a numerosi tipi di carrozzina. Scalacombi è dotato di modalità ostacolo, braccioli e poggiatesta ribaltabili, e si adatta a tutti i contesti abitativi.

- ✓ **Installazione:** pronto uso.
- ✓ **Flessibilità:** Scalacombi è pieghevole e pratico da smontare.

Smontabile
e facile da
trasportare



COMFORT

comodo & elegante

Durante lo sviluppo dei nuovi modelli di Scalamobil, è stata data priorità alla praticità. Il sedile ampio e stabile è rivestito con un materiale morbido per un comfort ottimale.

Il sistema di Soft Step consente una salita fluida delle scale con movimenti uniformi e costanti, senza sobbalzi.

Esteticamente, sia Scalamobil che Scalacombi, si integrano perfettamente all'ambiente domestico. Il design minimalista ed essenziale ne mette in risalto le qualità costruttive.

- ✓ **Confortevole:** grazie all'elettronica Soft Step
- ✓ **Qualità:** fabbricato secondo elevati standard – Made in Germany
- ✓ **Aspetto:** design accattivante






SCALE


Facila la vita anche in salita.

A differenza dei montascale classici, i prodotti Alber non richiedono interventi strutturali alla tua casa. Questo fa risparmiare tempo e denaro garantendo indipendenza in assoluta sicurezza.


Adatti a qualsiasi tipo di scala, comprese quelle strette, ripide o a chiocciola, grazie al design compatto e alla chiusura facilitata, i prodotti Alber Scala sono ideali anche da portare in viaggio.

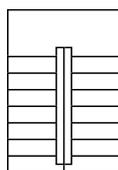


Altezza scalino fino a 20 cm

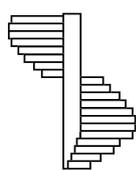

Scale a chiocciola

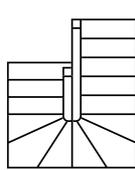

Scale con angoli stretti

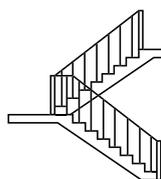

Scale esterne con corrimano


Nessun intervento edilizio necessario

Sicuro su ogni superficie.


Le scale differiscono non solo nella struttura, ma anche nei materiali e nel design, a seconda dello scopo e della posizione.

Scalamobil è in grado di affrontare indifferentemente le più diverse superfici: legno, pietra, metallo, o moquette. Le ruote, realizzate in materiale resistente all'abrasione, offrono aderenza e stabilità su tutte le superfici, garantendo sicurezza non solo all'utilizzatore ma anche agli operatori, durante la movimentazione. I modelli Scala non rovinano i rivestimenti delle scale, neppure dopo un utilizzo intensivo.


pietre &
mattonelle

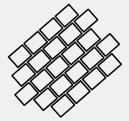


moquette &
tappeti

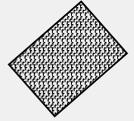

parquet &
laminato

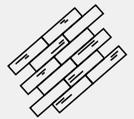


griglie &
superfici di metallo

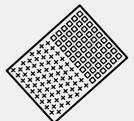

vetro &
plastica



i Tutte le superfici asciutte possono essere affrontate facilmente anche in modalità manuale.

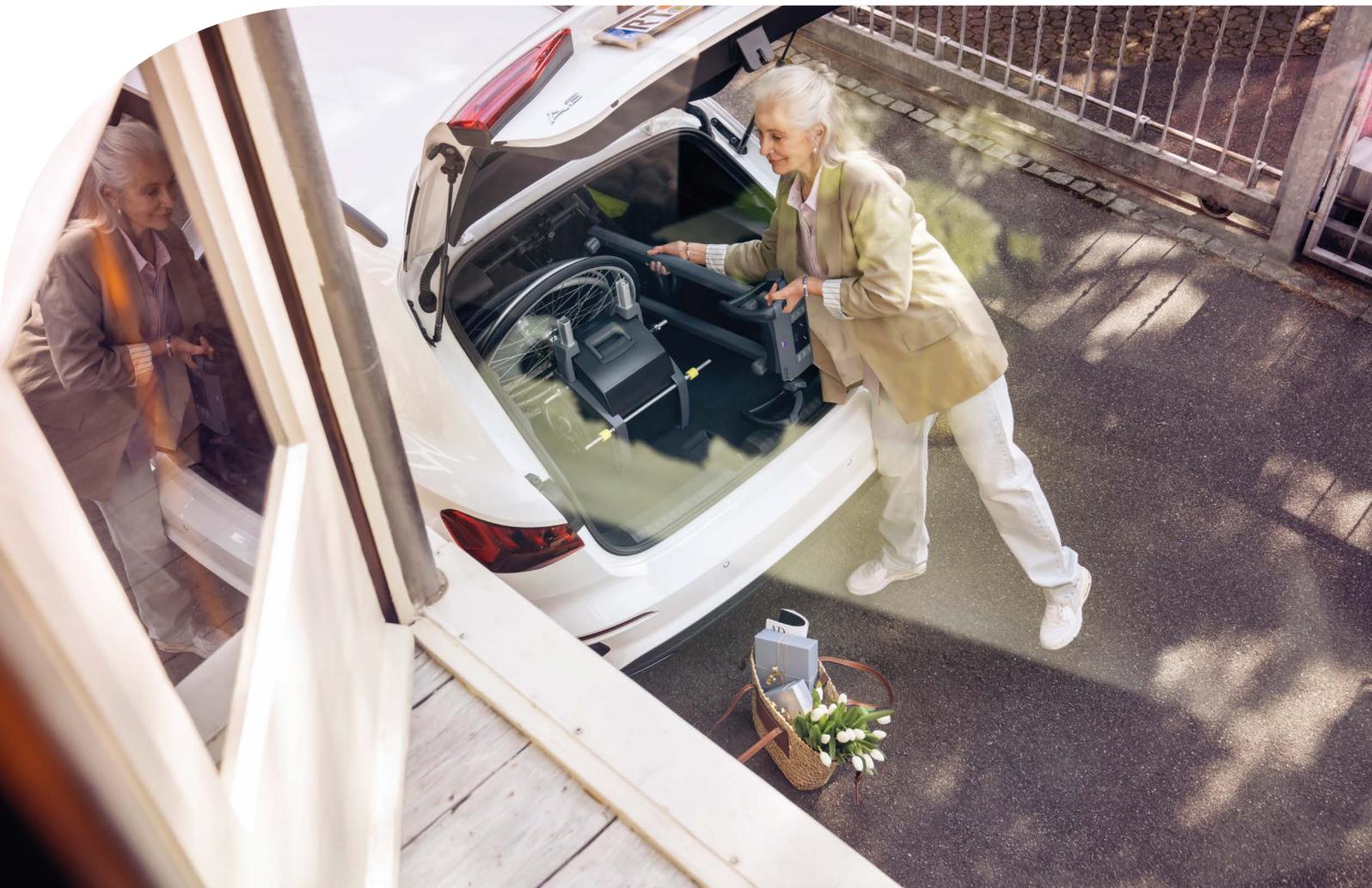

”

Scalamobil è una soluzione straordinaria: consente di affrontare le scale con facilità e autonomia, eliminando la necessità di assistenza esterna. Il design innovativo semplifica la vita quotidiana, rendendo l'accesso ai piani superiori agevole e sicuro per tutta la famiglia.

Scalamobil migliora la qualità della vita, rendendo le scale accessibili anche a chi ha problemi di mobilità limitata, come dolori alla schiena. Questa soluzione tecnologicamente avanzata restituisce autonomia e indipendenza, permettendo di affrontare le scale senza difficoltà e con maggiore sicurezza.

“







Affidabile. Sicuro.


Scalamobil è il dispositivo ideale per chi deve affrontare le scale pur restando sulla carrozzina. Scalacombi è la soluzione perfetta anche per chi necessita di un ausilio per salire le scale e per la movimentazione in vani scala stretti. Entrambi i modelli utilizzano la medesima tecnologia: due coppie di ruote azionate elettricamente salgono continuamente i gradini, uno dopo l'altro con continuità. La sicurezza di utenti e operatori è stata una priorità assoluta fin dalla prima richiesta di brevetto, nel 1986.

I MODELLI

scalamobil®**Si aggancia alla carrozzina**

Scalamobil può essere agganciato rapidamente a vari tipi di carrozzina senza il ricorso ad attrezzi. Questo permette agli utenti di restare seduti e di superare facilmente le barriere, sia a casa propria sia all'esterno.

- i** Scalamobil può essere agganciato anche a carrozzine particolarmente compatte.

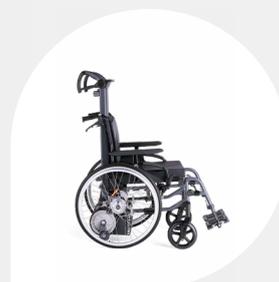**scalacombi®****Con seduta integrata**

Scalacombi è ideale per le persone che necessitano di assistenza nella salita delle scale ma non utilizzano una carrozzina.

Questo dispositivo è dotato di un sedile integrato e confortevole, e può essere ripiegato e riposto anche in spazi ristretti.

**Sempre inclusi.****Batteria**

Autonomia fino a 300 gradini.

**Caricabatterie automatico**

Carica e spegnimento intelligente.

**Impugnatura con display**

Regolabile, funzionale ed ergonomica.

DISPLAY

Sotto controllo.

Innovativo ed intuitivo

L'indicatore di inclinazione indica se il sistema è nella posizione corretta.



Modalità Ostacolo:

La funzione ostacoli rende molto più facile affrontare le barriere lungo il percorso verso le scale.



Immobilizzatore:

L'immobilizzatore protegge il dispositivo da un uso improprio.




On/off:

Pulsante principale per la funzione on/off.



In modalità automatica, la direzione di salita viene rilevata dai sensori e avviata automaticamente.

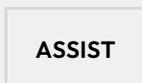

La salita è assistita quando il dispositivo è nella posizione corretta.




In modalità manuale, la salita delle scale è possibile in qualsiasi situazione, poiché le funzioni del sensore sono disabilitate.



Display intuitivo che visualizza le informazioni sulla batteria e la direzione di salita.

LARGHEZZA & ALTEZZA

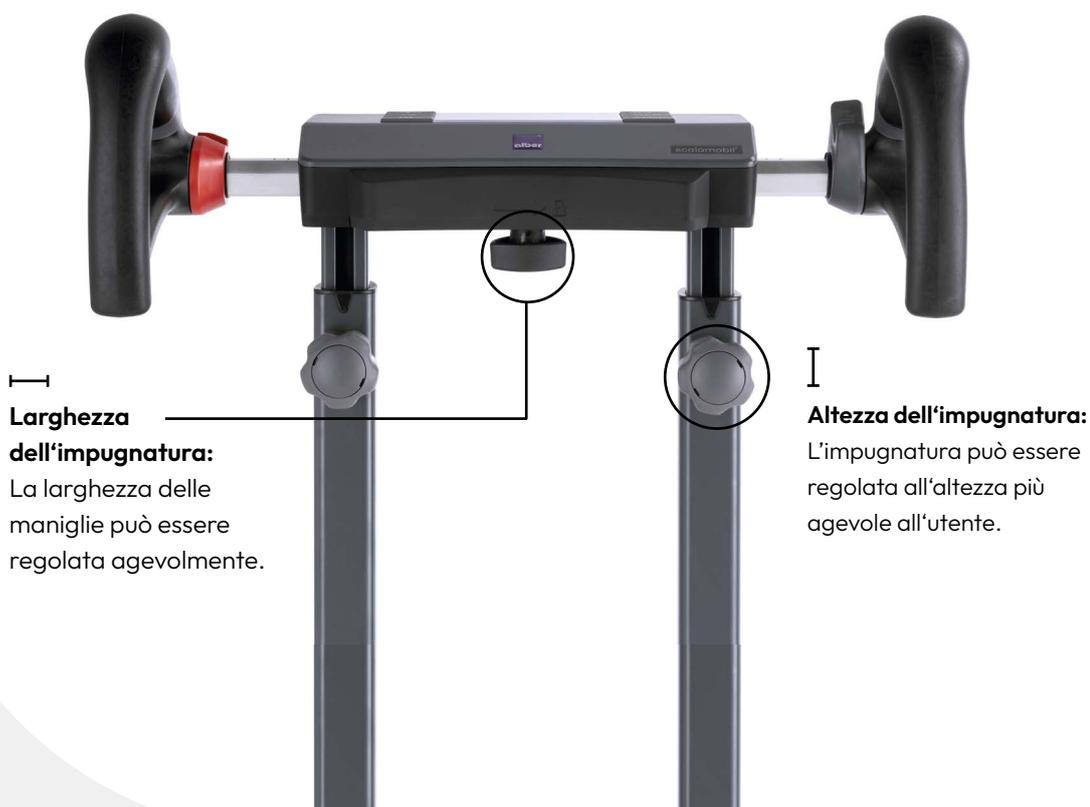

Larghezza dell'impugnatura:
La larghezza delle maniglie può essere regolata agevolmente.

Altezza dell'impugnatura:
L'impugnatura può essere regolata all'altezza più agevole all'utente.

SENSORI

Sicurezza.

La sicurezza è una priorità assoluta. Sensori integrati raccolgono ed elaborano tutte le informazioni necessarie per garantire l'incolumità dell'utente.

Aggancio:

Quando si utilizza il modello Scalamobil, è necessario rimuovere le ruote della carrozzina durante la salita.

Sensori durante la salita:

Per il comfort durante l'uso, il Soft Step è una delle funzioni più importanti della nuova generazione scala. Riduce automaticamente la velocità prima del contatto con ciascun gradino per un approccio delicato.

I sensori integrati nel dispositivo rilevano l'altezza del gradino, consentendo un movimento di salita ottimale e delicato.





Dati tecnici

	scalamobil S45	scalacombi S46
Peso		
Completivo	26 kg	37 kg
Peso massimo utente	140 kg	140 kg
Peso massimo complessivo	180 kg (scalamobil, carrozzina ed utente)	
Autonomia	Fino a 300 scalini (circa 20 piani)*	
Velocità	circa 12 scalini/minuto incluso Soft Step*	
Batteria	2x12 V; 3.4 Ah al piombo, sigillate e senza necessità di manutenzione.	

*A seconda del peso dell'utilizzatore della carrozzina e della carrozzina stessa, nonché della geometria dei gradini.



Accessori

01. Piastra

Piastra per fissare il dispositivo Scalamobil alla carrozzina. È necessario specificare il tipo di carrozzina e la larghezza della seduta al momento dell'ordine.

02. Poggiatesta

Il poggiatesta imbottito può essere regolato in altezza, profondità e angolazione, offrendo supporto e stabilità al collo e al capo.

03. Piastra per il trasporto delle ruote

La piastra consente di trasportare le ruote della carrozzina insieme al dispositivo Scalamobil. Compatibile con tutti i modelli standard di carrozzina.

04. Antiribaltamento

Gli antiribaltamento sono rimovibili tramite sgancio rapido e regolabili in altezza e lunghezza. La funzione di ribaltamento automatico permette di superare cordoli e pianerottoli.

05. Fissaggio automatico

Bloccaggio della carrozzina al dispositivo Scalamobil (senza perni di fissaggio e senza doversi piegare).

06. Sgancio rapido

Per salire le scale con il dispositivo Scalamobil, è necessario rimuovere prima le ruote della carrozzina. E' necessario che la carrozzina sia dotata di perni a sgancio rapido (disponibile come kit di conversione).

07. Collegamento ISOFIX® (solo per Scalacombi S46)

Consente di fissare facilmente i seggiolini per bambini. Per una panoramica completa della gamma di accessori, come le cinture di sicurezza, ecc., visitare: www.alber.de/scalamobil/accessories



i
Scalamobil e Scalacombi vengono forniti con:
un'impugnatura con display,
un'unità di salita con freno di sicurezza, un pacco batteria e caricabatterie.



Powered by alber.

Mobilità intelligente.

Leader di mercato dei propulsori per carrozzine, Alber GmbH, parte del gruppo Invacare, vanta oltre 35 anni di esperienza nella mobilità smart.

Siamo un partner fidato per il sistema sanitario nazionale, per clienti privati e fornitori in tutto il mondo. Dalla consulenza iniziale al servizio post-vendita: puoi contare su di noi.

www.alber.de

Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, per trovare risposte a tutte le tue domande e per individuare il distributore Alber più vicino.

Il team Alber GmbH è sempre pronto a fornirvi assistenza, innovazione e servizio. Restiamo in contatto!

Conosci la famiglia prodotti Alber Via?

Ausili pensati per i caregiver.

I modelli della famiglia Alber Via sono progettati per carrozzine che necessitano di un caregiver per le movimentazioni e la mobilità. Questi modelli offrono un potente aiuto in fase di spinta e manovra per movimentare la carrozzina in sicurezza.



viamobil®

**Potenza in salita –
sicurezza in discesa.**

Il miglior prodotto per l'aiuto
nella spinta e nel controllo,
pensato per chi accompagna.





scalamobil – il montascale unico, innovativo e sicuro.

Scalamobil e Scalacombi riportano il marchio CE in conformità al Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR) 2017/745, sono stati testati da TÜV Süd e sono certificati secondo la norma di prodotto EN 7176-28.

Nostro impegno per la qualità – Vostra sicurezza!

Alber è certificata secondo lo standard di gestione della qualità ISO 13485 per dispositivi medici.

Il nostro sistema di gestione ambientale (SGA), certificato secondo ISO 14001, garantisce che i nostri prodotti siano realizzati in modo responsabile nel rispetto dell'ambiente.



CE-conformity according to the European Medical Devices Regulation (MDR)

Le specifiche tecniche e le informazioni qui riportate potrebbero essere soggette a modifiche o aggiornate.

In occasione del lancio sul mercato italiano, saranno comunicati ed aggiunti ai documenti commerciali i codici di rimborso e di registrazione al Repertorio Dispositivi Medici, in puntuale conformità alle normative vigenti.

46.0002.6.01.02 Version 09/2024 © Alber GmbH, Albstadt.
Subject to technical changes.



Alber GmbH
Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt-Tailfingen, Germany
info@alber.de



INVACARE MECC SAN SRL
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) – ITALY
Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

MADE IN GERMANY ■■■