


Flo-tech[®] Contour



Concepito per offrire comfort e
una postura adeguata

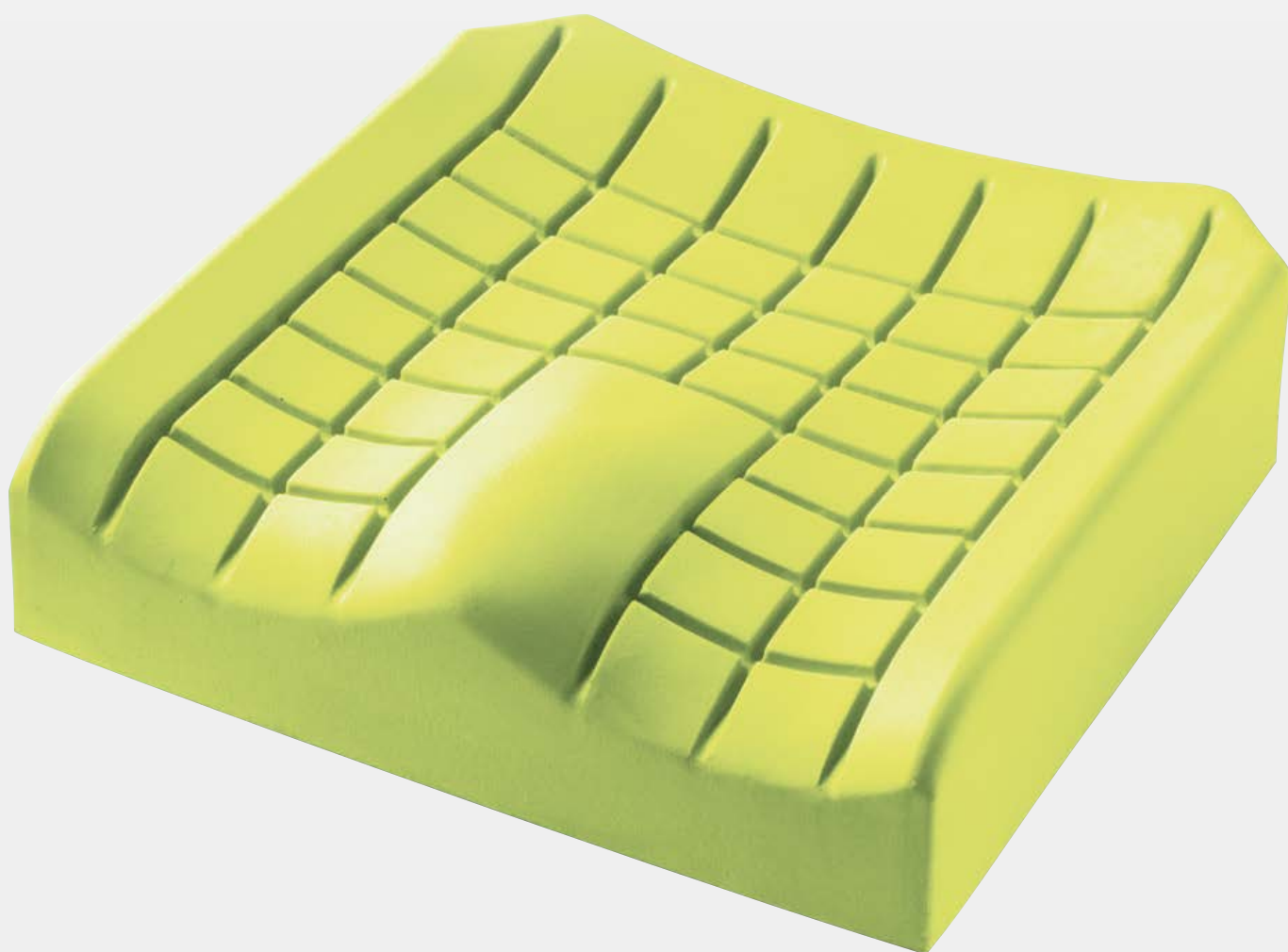

Yes, you can.

La superficie del cuscino Invacare **Flo-tech Contour** è suddivisa in sezioni sagomate.

Il suo design supporta l'utilizzatore e migliora la redistribuzione della pressione. La combinazione di un migliorato posizionamento posturale e di un'augmentata superficie di supporto contribuisce in modo significativo alla prevenzione delle ulcere da pressione. Questo cuscino è adatto a utenti con peso elevato.

Cuscino in schiuma modellata

La modellatura permette ai cuscini **Flo-tech** di avere una forma tridimensionale, che non può essere riprodotta con la schiuma tagliata. La schiuma modellata è altamente resistente, per una maggiore durata nel tempo.

Superficie seduta sagomata

Offre maggiore stabilità e supporto posturale; le scanalature riducono le forze di taglio e frizione.

Caratteristiche e opzioni



Fodera resistente ai liquidi

La fodera è bi-elastica, resistente all'acqua e traspirante. E' dotata di base antiscivolo e maniglia per il trasporto.

Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Contour** è disponibile in un ampio range di misure, da 360 x 330 a 600 x 550 mm. Consulta la scheda d'ordine.

Protezione Ultra-fresh™

Trattamento anti-microbico e antibatterico che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
				
83 misure	103 mm	1.38 kg	152 kg (191 kg sulle dimensioni 560 x 560 e 560 x 610 mm)	80°

Prodotto secondo gli Standard europei: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-1 Match, e BS 7176 (Crib 5)

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Colori

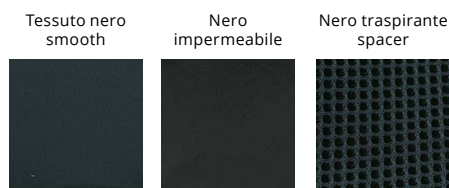

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.®