


Flo-tech[®] Lite



Cuscino sagomato a basso profilo
che offre grande comfort e
migliora il posizionamento

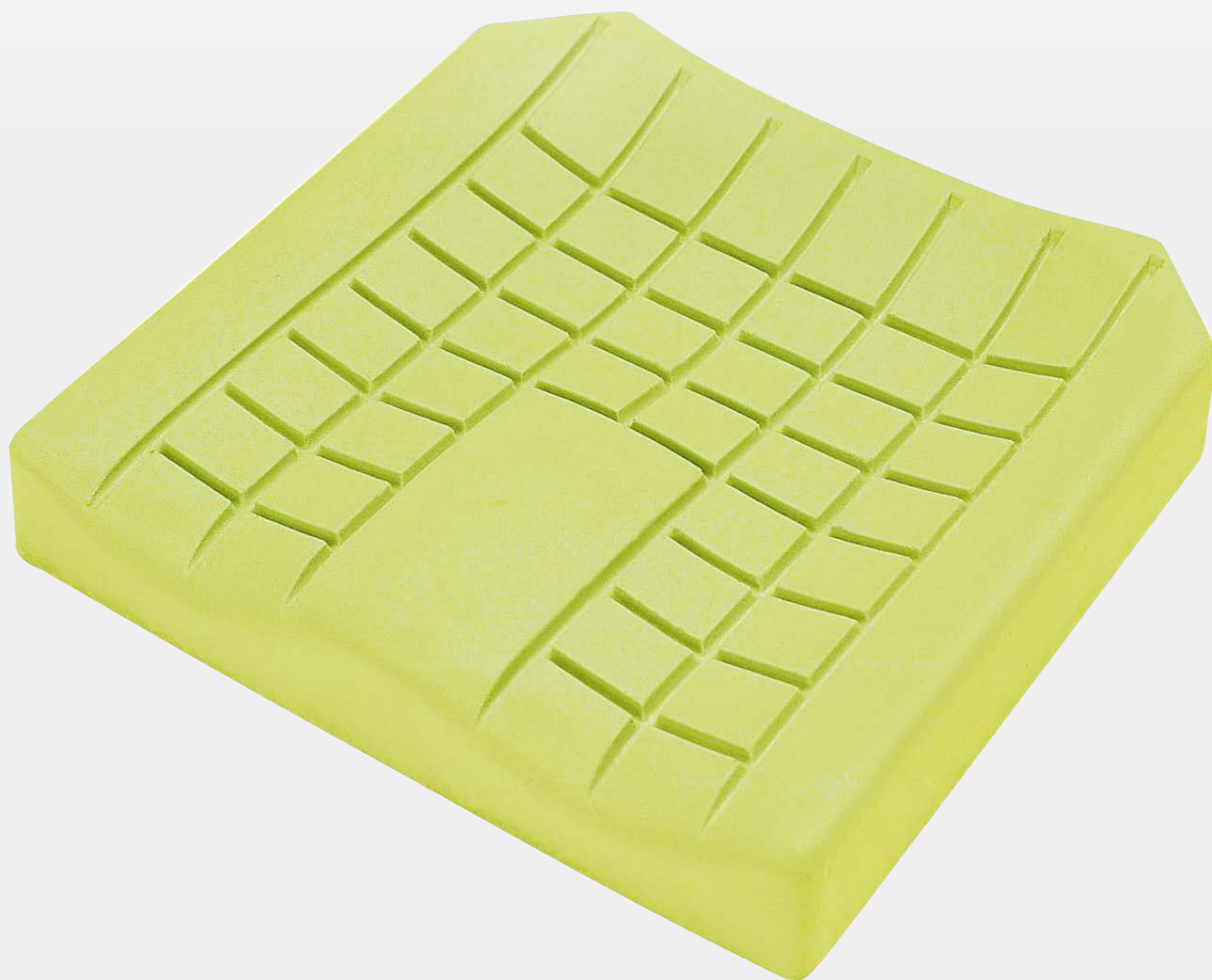

Yes, you can.

Il cuscino Invacare **Flo-tech Lite** è un cuscino sagomato a basso profilo, ideale per utenti a basso rischio di sviluppare ulcere da pressione e pensato principalmente per offrire comfort. La superficie di seduta sagomata garantisce una maggiore stabilità e supporto posturale. Con dimensioni a partire da 250 x 250 mm, il cuscino **Flo-tech Lite** è particolarmente indicato per utenti in età pediatrica.

Caratteristiche e opzioni



Fodera impermeabile e traspirante

Il rivestimento è bielastico, resistente all'acqua e permeabile al vapore. E' dotato di una base antiscivolo e di una maniglia per il trasporto.



Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Lite** è disponibile in un ampio range di misure, da 250 x 250 a 510 x 460 mm. Consulta la scheda d'ordine.



Protezione Ultra-fresh™

Trattamento anti-microbico e anti-batterico che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

Base in schiuma a basso profilo realizzata in schiuma modellata di alta qualità e resilienza

La schiuma resiliente di alta qualità è prodotta con una formula esclusiva che garantisce un'elevata redistribuzione della pressione e una maggiore durata del prodotto.

La modellatura consente al cuscino **Flo-tech Lite** di offrire una forma tridimensionale che non può essere ottenuta con schiuma tagliata.

Il pomello anteriore del cuscino separa le cosce, favorisce una postura corretta e permette la circolazione dell'aria.

Superficie di seduta sagomata

Offre una migliore stabilità e un maggiore supporto posturale. Garantisce inoltre una distribuzione del peso più efficace rispetto a una superficie piana. Le incisioni (castellature) del cuscino permettono lievi movimenti, contribuendo così a ridurre le forze di taglio e di frizione.

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
Flo-tech Lite 61 misure	78 mm	1.5 kg	127 kg	80°

Prodotto secondo gli Standard europei: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match e BS 7176 (Crib 5)

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Colori

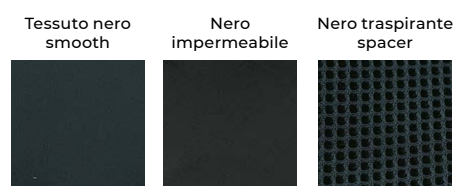

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.®