

Flo-tech® Lite Visco



Cuscino in memory foam
viscoleastico a basso profilo
per un comfort eccezionale



Yes, you can.

Il cuscino Invacare **Flo-tech Lite Visco** è realizzato in schiuma viscoelastica ad alta densità, che ha proprietà di adattarsi alla forma dell'utente. Questo garantisce un livello eccezionale di comfort e migliora la distribuzione della pressione. La sua altezza lo rende una soluzione ideale per un utilizzo su sedie o su carrozzine, facilitando i trasferimenti laterali.



Caratteristiche e opzioni



Schiuma viscoelastica a bassa memoria – Progettata per massimizzare il contatto con il corpo e il comfort

Questa schiuma viscoelastica si adatta delicatamente alla forma del corpo dell'utente, aumentando l'area di contatto per offrire un supporto migliore. Il risultato è un comfort eccezionale e una distribuzione ottimale della pressione, ideale per favorire il rilassamento e ridurre i punti di pressione.

Superficie di seduta anatomica con rialzo centrale e supporti laterali

Offre un lieve supporto laterale e stabilità pelvica per migliorare la postura dell'utente.

Fodera impermeabile e traspirante

Il rivestimento è bielastico, resistente all'acqua e permeabile al vapore. E' dotato di una base antiscivolo e di una maniglia di presa per il trasporto.

Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Lite visco** è disponibile in un ampio range di misure, da 250 x 250 fino a 510 x 460. Consulta la scheda d'ordine.

Tre densità disponibili

Disponibile in tre diverse densità per adattarsi ad un'ampia gamma di pesi corporei: Soft (fino a 32 kg), Medium (fino a 51 kg) e Firm (fino a 100 kg).

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
				
61 misure	78 mm	1.26 kg	100 kg	80°

Prodotto secondo gli Standard europei:
Schiuma: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2,
BS 5852: 1982 Crib 5

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono da considerarsi validi solo se il cuscino scelto ha larghezza e profondità adeguate all'utente.

Colori

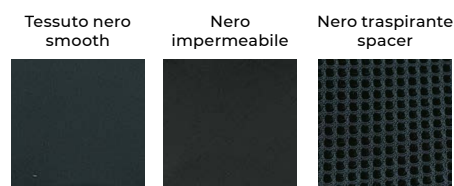

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.