

Flo-tech® Image



Cuscino anatomico con fluidi
automodellanti



Yes, you can.

Il cuscino Invacare **Flo-tech Image** utilizza una combinazione di una base in schiuma sagomata e una sacca fluida che copre l'area sacrale, migliorando la distribuzione della pressione e l'immersione delle tuberosità ischiatiche.

Questo design offre un elevato livello di protezione per gli utenti ad alto rischio di sviluppare ulcere da pressione. L'altezza contenuta lo rende ideale sia per l'uso su sedie che su carrozzine.

Caratteristiche e opzioni



Fodera traspirante e impermeabile

Il rivestimento è bielastico, resistente all'acqua e permeabile al vapore. E' dotato di una base antiscivolo e di una maniglia di presa per il trasporto.



Ampio range di misure

Invacare **Flo-tech Image** è disponibile in un ampio range di misure, da 360 x 330 fino a 510 x 46. Consulta la scheda d'ordine.



Protezione Ultra-fresh™

Trattamento anti-microbico e anti-batterico che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

Cuscino sottile sagomato in schiuma e gel

Alcuni utenti preferiscono un cuscino con profilo basso, trovandolo più compatibile con le loro attività quotidiane.

Invacare **Flo-tech Image** combina i benefici di una superficie superiore in schiuma sagomata con una sacca fluida che copre le aree ischiatiche e sacrali, offrendo un supporto maggiore e riducendo le pressioni.

Superficie di seduta sagomata con sacca in gel

Offre maggiore stabilità e supporto posturale; le castellazioni in schiuma modellata e il fluido si combinano efficacemente per ridurre le forze di attrito e di scorrimento sui tessuti.

Dati tecnici


Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

Misure	Altezza	Peso totale prodotto	Peso max utente¹	Temperatura max lavaggio
				
Flo-tech Image 50 misure	78 mm	1.82 kg	140 kg	80°

Prodotto secondo gli Standard europei:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match
e BS 7176 (Crib 5)

1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Colori

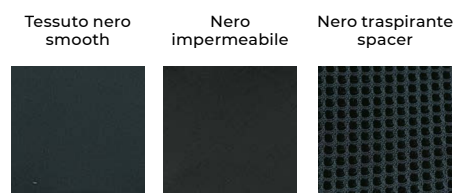

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc San s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) - ITALY



Yes, you can.®