

Flo-tech[®] ***Solution Xtra***



Cuscino posturale con
sistema modulare



Yes, you can.

Combina eccellenti proprietà di riduzione della pressione con la promozione di un migliore posizionamento.

Il cuscino con sistema modulare Invacare **Flo-tech Solution Xtra** è stato sviluppato in collaborazione con terapisti per rispondere a esigenze complesse di seduta.

Grazie a questo sistema modulare, gli interventi terapeutici possono essere affrontati in modo più efficace per quanto riguarda il mantenimento posturale, massimizzando il comfort e preservando l'integrità della cute.

Progettato per favorire un migliore posizionamento posturale.

I componenti modulari sono realizzati in schiuma CMHR ad alta densità per garantire una correzione attiva e un buon posizionamento. I cunei presentano segni di riferimento e sistemi di aggancio Hook & Look, che ne consentono il taglio su misura in base alle esigenze individuali. L'applicazione di cunei sotto il cuscino, combinata con l'uso di componenti modulari sulla superficie superiore, offre una gamma altamente versatile di opzioni per i terapisti che desiderano intervenire in modo specifico sulla gestione posturale.



Grande sacca doppia di fluido che copre l'intera superficie superiore del cuscino

L'area di contatto tra l'utente e il cuscino in schiuma è protetta, poiché il fluido ridistribuisce la pressione lontano dalle prominenze ossee. Uno strato aggiuntivo di fluido è posizionato sotto le aree ischiatiche e sacrali per migliorare ulteriormente la qualità di riduzione della pressione, rendendolo adatto ad utenti a rischio molto elevato.

Design della fodera

La fodera è realizzata in un materiale resistente all'ingresso dei fluidi.

Inoltre, è stato integrato un design innovativo che permette alla fodera di espandersi, aumentando così l'immersione dell'utente nel cuscino una volta aggiunti i componenti Invacare **Flo-tech Solution Xtra**. La fodera è dotata di due zip con cursori codificati a colori: blu per aprire la fodera e verde per espanderla. La fodera può essere aperta sia dalla parte superiore che inferiore, per permettere di regolare i componenti secondo necessità.

Caratteristiche e opzioni



Supporto per obliquità pelvica

Il supporto per obliquità pelvica può essere inserito su entrambi i lati della cavità ischiatica, sotto il cuscino in gel.



Allineatore per anche

L'allineatore per anche può essere posizionato su uno o entrambi i lati del bordo posteriore del cuscino fissato con sistema hook&loop e utilizzato unilateralmente o bilateralmente per favorire l'allineamento centrale e delle anche.



Allineatore per cosce

L'allineatore per cosce può essere posizionato su entrambi i lati nella parte anteriore della sporgenza femorale e utilizzato unilateralmente o bilateralmente per ridurre la rotazione esterna e l'abduzione delle cosce.

Caratteristiche e opzioni



Cuneo abduttore - standard o alto

Il cuneo può essere posizionato nella parte anteriore del cuscino per aumentare l'altezza del pomello esistente, aiutando l'allineamento femorale, mantenendo le articolazioni dell'anca e può contribuire a gestire una eventuale pasticità.



Rigidizer, base rigida

Il rigidizer va collocato sotto l'intero cuscino (compresi i cunei). Mantiene una base seduta solida nel caso di sedute in tela.



Sacca gel aggiuntiva

Una sacca gel aggiuntiva può essere inserita nella cavità ischiatica dove necessario. Un posizionamento mirato aiuta a prevenire lo scivolamento in avanti, supporta la pressione sacrale e può aiutare in caso di lieve obliquità pelvica.



Cuneo frontale

Il cuneo anteriore va posizionato sotto la base del cuscino e deve essere ritagliato su misura. Aiuta a favorire la stabilità pelvica e compensare l'inclinazione posteriore, riducendo quella anteriore.



Cunei angolari rastremati

I cunei angolari rastremati possono essere posizionati su qualsiasi angolo della base del cuscino. Possono aiutare a favorire la rotazione laterale dell'anca e l'allineamento delle cosce. Possono essere utilizzati sotto una coscia per lievi differenze di flessione dell'anca o per posizionamenti posturali meno impegnativi.



Cunei laterali

I cunei laterali possono essere posizionati sotto la base del cuscino e devono essere tagliati in base alla dimensione del cuscino. Aiutano a favorire la stabilità laterale del bacino e delle anche e incoraggiano un posizionamento più sagomato.



Protezione Ultra-fresh™

Trattamento anti-microbico e anti-batterico che limita la proliferazione di batteri e cattivi odori, prolungando la durata del prodotto e la sensazione di freschezza.

Dati tecnici

Per maggiori informazioni su questo prodotto, incluso il manuale d'uso, visita il nostro sito www.invacare.it

	Misure	Altezza	Peso tot. prodotto	Peso max utente ¹	Temperatura max lavaggio
					
Flo-tech Xtra	44	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°



Bariatric use


1. I limiti massimi di peso dell'utente indicati sono stimati assumendo che il cuscino selezionato sia della larghezza e profondità adeguate per l'utente.

Prodotto secondo gli Standard europei:

BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match
e BS 7176 (Crib 5)

Colori

Fodera nera
tessuto smooth

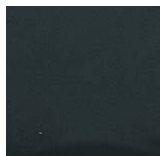

Fodera nera
traspirante spacer



Si prega di notare che i colori potrebbero variare leggermente rispetto a quelli mostrati sopra.

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via Marco Corner, 19
36016 Thiene (VI) – ITALY



Yes, you can.®